

HEINE OMEGA 600

Resumen de las características más importantes

Muchas gracias por elegir HEINE OMEGA 600: ¡le deseamos que tenga mucho éxito y que disfrute de su nuevo instrumento!

Si desea compartir sus experiencias o sus descubrimientos, estaríamos encantados de leerlos: #heine #iuseheine #OMEGA600



Toma de carga USB-C
Carga con cable USB-C

Indicador del estado de carga

● ● ● ●
66–100 %

● ● ● ●
33–66 %

● ● ● ●
10–33 %

● ● ● ● * parpadea
< 10 %


Ajuste de luminosidad

On/Off, ajuste progresivo de la intensidad de la luz entre el 3 y el 100 %, así como visionBOOST entre el 100 y el 245 %, para una visibilidad hasta un 20 % mejor en las opacidades de los medios. Se puede posicionar para usuarios diestros y zurdos.

Palanca de selección de filtro



Filtros exento de rojo, amarillo y azul cobalto

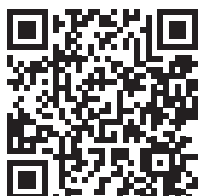

El video «Cómo configurar su OMEGA 600» explica cómo ajustar el instrumento a sus necesidades personales.

HEINE OMEGA 600

Resumen de las características más importantes



Función «flip-up» para voltear hacia arriba la unidad óptica
Para una interacción más cómoda con el paciente



Oculares
Para acomodar la vista de la mejor forma posible sustituya los oculares +2D montados inicialmente por las lentes neutrales 0D (suministradas con el instrumento)



Cabezal coobservador TM1



Ajuste de la anchura



Tapa de protección contra el polvo para el cristal frontal

