


Adattatore universale per smartphone per HEINE DELTA 30 e DELTAone. Documentazione dermatoscopica digitale con la fotocamera dello smartphone.

È SEMPLICISSIMO!



1 Con l'adattatore universale per smartphone HEINE è possibile utilizzare praticamente qualunque smartphone, indipendentemente dal sistema operativo (Android, Windows, ...). Per la maggior parte dei modelli di iPhone*, l'assortimento dei prodotti HEINE comprende delle cover per smartphone su misura, ai quali è già incollato in modo fisso l'adattatore.

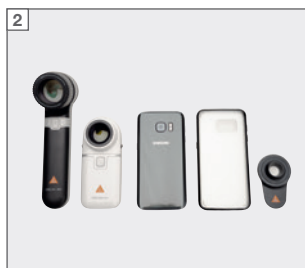

2 Avete bisogno di un DELTA 30 o DELTAone, dell'adattatore e di una cover adatta al vostro smartphone**.




3 Per l'adattatore universale è necessario utilizzare cover per cellulare con superficie liscia, la fotocamera non deve sporgere dall'involucro.



4 Se il vostro smartphone ha una sola fotocamera, fissate l'adattatore al centro davanti a tale fotocamera.



Se il vostro smartphone ha più fotocamere, dovrete prima verificare quale sia la fotocamera principale: posizionate l'adattatore sulla parte posteriore del vostro smartphone in modo che sia centrato sulla fotocamera principale. Il campo visivo sullo schermo del cellulare è chiaro e visibile? Se è tutto a posto, fissate l'adattatore davanti a questa fotocamera.

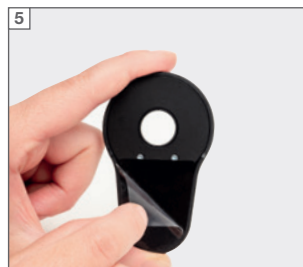

Togliere la pellicola protettiva e premete l'adattatore davanti alla lente della fotocamera selezionata.



È quasi fatta!



Il magnete dell'adattatore permetterà di agganciare ora lo smartphone e la sua cover all'anello di messa a fuoco del dermatoscopio.

Ora potete scattare le foto come di consueto con la funzione fotocamera del vostro smartphone.

*Apple, il logo Apple e iPhone sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. HEINE raccomanda l'uso di un iPhone a partire dalla versione 6.
Tutti gli altri marchi rimangono di proprietà delle rispettive aziende proprietarie.

**Lo smartphone e la cover non sono compresi nel volume di fornitura.