



La innovadora Serie GAMMAG® de esfigmomanómetros sin látex de HEINE sienta normas en cuanto a funcionalidad, calidad y valor. Un diseño funcional y moderno, en combinación con una precisión de alta calidad de manómetros y una construcción duradera, garantiza de función fiable a lo largo de muchos años en entorno clínico.

«Sistema de un tubo» con un nuevo tipo de sistema de medida (patente alemana registrada).

La construcción de la válvula de ventilación con óptima resistencia al aire del sistema de medida, produce una amortiguación de los golpes de aire mientras se realiza el bombeo. Esto garantiza una admisión de aire constante y sin golpes en el sistema de medida. Una ventaja que hasta ahora sólo era posible con sistemas de doble tubo.

Serie GAMMAG / validación clínica reconocida

Según protocolo de la Unión Europea referente a hipertensión, los aparatos de medida de tensión GAMMAG® de HEINE disponen de la validación clínica reconocida. Queda confirmada la exactitud constante de los aparatos de medida de tensión de la serie GAMMAG en su valor sistólico y diastólico.



HEINE GAMMA G7®

El modelo superior con componentes de metal ligero



- ⋮ A prueba de golpes.
- ⋮ Materiales libres de látex.
- ⋮ El nuevo tipo de sistema de medida. Patente alemana registrada).
- ⋮ Manómetro con seguridad de sobrepresión.
- ⋮ El micro filtro protege la válvula y el sistema de medida.
- ⋮ Escala de diseño grande de HEINE. Diámetro 56mm, se puede leer cómodamente.
- ⋮ Alta calidad de la aguja indicadora, exacta, equilibrada, ajustada estable y resistente a los golpes.
- ⋮ Gran pera insufladora para inflar el manguito rápidamente (50% más volumen de la pera).
- ⋮ Válvula giratoria de precisión para dosificación fina; tope de plástico en ambas direcciones de giro para evitar que quede trabada.
- ⋮ Parte superior de la carcasa de aleación de aluminio/TP elastómero de 2 componentes con anillo de protección para la absorción de golpes para la esfera y el cristal.
- ⋮ Parte inferior de la carcasa de poliamida de dos componentes resistente a golpes TP-Elastómero con cubierta antideslizante para absorción de golpes.
- ⋮ Cuchara de aleación de Zinc de alta calidad adaptable para diestros y zurdos.
- ⋮ Manguito de 1 tubo de alta calidad con cierre de velcro lavable.
- ⋮ Diseño ergonómico: El GAMMA G7 está bien equilibrado tanto para la comodidad como para su fácil manejo.
- ⋮ 10 años de garantía.*

* sobre perfecto estado de los materiales, de la elaboración y la fabricación.

- ⋮ A prueba de golpes
- ⋮ Materiales libres de látex
- ⋮ Carcasa de metal ligero
- ⋮ 10 años de garantía

GAMMA G7	
completo con manguito para adultos en estuche de cremallera	M-000.09.232
completo con manguito para niños en estuche de cremallera	M-000.09.233
El equipo para medico, con manguito para niños, para adultos y adulto pequeños en estuche de cremallera	M-000.09.554
completo con manguito para adultos, sin estuche de cremallera en caja de 10 unidades	M-000.09.560

HEINE GAMMA G5®

El modelo con válvula giratoria



∴ A prueba de golpes

∴ Materiales libres de látex

∴ Carcasa de poliamida

Equipo y diseño igual al GAMMA G7, pero:

- ∴ Carcasa de material plástico-poliamida/TP elastómero de 2 componentes con cubierta antideslizante para absorción de golpes.
- ∴ Cuchara de plástico poliamida apta para diestros y zurdos.
- ∴ 5 años de garantía.*

* sobre perfecto estado de los materiales, de la elaboración y la fabricación.

GAMMA G5	
completo con manguito para adultos, en estuche de cremallera	M-000.09.230
completo con manguito para niños, en estuche de cremallera	M-000.09.231
El equipo para medico, con manguito para niños, para adulto s y adultos pequeños en estuche de cremallera	M-000.09.555
completo con manguito para adultos, sin estuche de cremallera en caja de 10 unidades	M-000.09.561

HEINE GAMMA GP®

El modelo estándar con válvula de botón



∴ A prueba de golpes

∴ Materiales libres de látex

∴ Carcasa de poliamida

Equipo y diseño igual al GAMMA G5 pero con válvula de botón.

- ∴ Válvula de botón innovativo (Pat. DE 10353157): Con dosificación fina, desinflado muy rápido, prácticamente sin desgaste. Para diestros y zurdos.
- ∴ 5 años de garantía.*

* sobre perfecto estado de los materiales, de la elaboración y la fabricación.

GAMMA GP	
completo con manguito para adultos en estuche de cremallera	M-000.09.242
completo con manguito para niños en estuche de cremallera	M-000.09.243
El equipo para medico, con manguito para niños y para adultos y adultos pequeños en estuche de cremallera	M-000.09.556
completo con manguito para adultos, sin estuche de cremallera en caja de 10 unidades	M-000.09.562

HEINE GAMMA GST®

El modelo para automedición



Equipo y diseño igual al GAMMA G5 con estetoscopio integrado en el manguito para mediciones fáciles:

- ∴ Carcasa de material plástico-poliamida/TP elastómero resistente a los golpes de 2 componentes con cubierta antideslizante para absorción de golpes.
- ∴ Cuchara de materia plástica-poliamida apta para diestros y zurdos.
- ∴ Manguito de un tubo de alta calidad con práctico estribo de tracción, el fonendoscopio integrado con olivas blandas y cómodas con inserción por rosca.
- ∴ 5 años de garantía.*

* sobre perfecto estado de los materiales, de la elaboración y la fabricación.

GAMMA GST	
completo con manguito para adultos en estuche de cremallera	M-000.09.271



HEINE GAMMA XXL LF®

El modelo práctico para consultorio



[01]

∴ Escala grande

∴ Sin látex

∴ 10 años de garantía

El GAMMA XXL LF– el sustituto ideal del aparato de mercurio que evita los daños al medio ambiente.

- ∴ **Materiales sin látex.**
- ∴ **Modelo con una estabilidad especial**, ideal para aplicaciones en hospitales y en consultorios.
- ∴ **Escala giratoria**, grande (diám. 130 mm), bien legible a gran distancia.
- ∴ **Gran alcance** mediante tubo espiralado (3m).
- ∴ **Aguja equilibrada** para indicaciones exactas, ajustada establemente.
- ∴ **Válvula de precisión** de metal, desinflado fácil de dosificar.
- ∴ Manómetro de larga duración **preciso y libre de mantenimiento.**
- ∴ **Montaje en pared, mesa, riel y trípode con ruedas** (ajustable en altura).
- ∴ **10 años de garantía.***

* sobre perfecto estado de los materiales, de la elaboración y la fabricación.

GAMMA XXL LF

GAMMA XXL LF-Modelo mural W [01]	M-000.09.323
GAMMA XXL LF-Modelo S con trípode [02]	M-000.09.326
GAMMA XXL LF-Modelo R de riel [03]	M-000.09.325
GAMMA XXL LF-T Modelo T de sobremesa (sin tubo espiralado) [04]	M-000.09.322

Accesorios

Cesta para brazal para GAMMA XXL LF-T	M-000.09.141
Soporte de sobremesa para GAMMA XXL LF-T	M-000.09.142
Trípode ajustable en altura para GAMMA XXL LF-S	M-000.09.145
Soporte universal para GAMMA XXL LF-R, -S, -W	M-000.09.306
Pinza de fijación a riel para GAMMA XXL LF-R	M-000.09.307



[03]



[02]



[04]

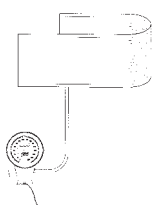
Manguitos para tensiómetros y accesorios

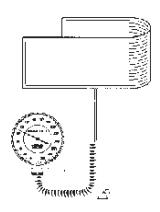
Manguitos para tensiómetros de material sin látex

Manguitos para tensiómetros GAMMA G7/G5/GP/GST/XXL LF.



- ⌘ Materiales sin látex.
- ⌘ Adaptables a los tensiómetros usuales.
- ⌘ Manguitos de alta calidad con cierre de velcro de material resistente, fisiológicamente inofensivo.
- ⌘ Costura doble.
- ⌘ Lavable.
- ⌘ Con señalizador de posición exacta.
- ⌘ Límites de tamaño impresos con marca de control para circunferencia del brazo.
- ⌘ Tubo de gran flexibilidad con amplio espesor de pared. Alta duración.
- ⌘ Fiabilidad comprobada, sistema totalmente hermético.

	GAMMA G7/G5/GP	Manguitos de 1 tubo, completo			Bolsa de 1 tubo		Fundas de manguitos	
		Tamaño	Perímetro/cm		Tamaño		Tamaño	
	Niños pequeños	6x28	8–13	M-000.09.700	5x15	M-000.09.661	6x28	M-000.09.059
	Niños	10x34	13–20	M-000.09.702	8x20	M-000.09.663	10x34	M-000.09.060
	Adultos pequeños	14x53	20–29	M-000.09.704	11x23	M-000.09.664	14x53	M-000.09.061
	Adultos	14x58	29–41	M-000.09.619	12x28	M-000.09.665	14x58	M-000.09.055
	Muslo	20x86	>41	M-000.09.615	18x52	M-000.09.667	20x86	M-000.09.057

	GAMMA XXL LF	Manguitos de 2 tubos*, compl,			Bolsa de 2 tubos		Fundas de manguitos	
		Tamaño	Perímetro/cm		Tamaño		Tamaño	
	Niños pequeños	6x28	8–13	M-000.09.701	5x15	M-000.09.671	6x28	M-000.09.059
	Niños	10x34	13–20	M-000.09.703	8x20	M-000.09.673	10x34	M-000.09.060
	Adultos pequeños	14x53	20–29	M-000.09.705	11x23	M-000.09.674	14x53	M-000.09.061
	Adultos	14x58	29–41	M-000.09.629	12x28	M-000.09.675	14x58	M-000.09.055
	Muslo	20x86	>41	M-000.09.625	18x52	M-000.09.677	20x86	M-000.09.057

GAMMA GST	Manguito de 1 tubo, completo con estetoscopio			Bolsa de 1 tubo		Funda de manguitos	
	Tamaño	Perímetro/cm		Tamaño		Tamaño	
Adultos	14x53	22–32	M-000.09.621	11x23	M-000.09.669	14x53	M-000.09.079