

Lámparas de exploración

LUZ BRILLANTE PARA SUS APLICACIONES DIARIAS

Las lámparas de exploración de HEINE han sido desarrolladas en base a las más modernas tecnologías de iluminación: Lámparas de exploración halógenas flexibles, con innovadoras lámparas de alta tecnología que ofrecen una extraordinaria intensidad luminosa.

Las tres diferentes opciones de montaje - trípode con ruedas, soporte mural y fijación por mordaza - permiten una integración variable en su consultorio y en el exigente día a día médico.



Lámpara de exploración HEINE HL 5000®

Lámparas halógenas con una extraordinaria intensidad luminosa



∴ Brazo flexible

∴ Iluminación muy intensa

∴ 140 000 lux a 30 cm

Con una salida de luz de 140 000 lux a una distancia de 30 cm la lámpara de exploración HL 5000 es ideal para examinar y reconocer detalles mínimos. La construcción flexible tipo «cuello de cisne» hace posible un radio de acción de 120 cm. Está disponible en tres versiones: Soporte mural, Fijación por mordaza, Trípode sobre ruedas.

- ∴ La bombilla halógena de 12V/50W de larga duración con una salida de luz de 140 000 lux a 30 cm. Luz muy brillante y blanca.
- ∴ Cabezal de iluminación extremadamente compacto. Sin obstrucción de la visión, de fácil manejo.
- ∴ 3 diferentes opciones de montaje de pared, mesa y trípode sobre ruedas. Versátil.
- ∴ La bombilla halógena dura un mínimo de 4000 horas. Económica.
- ∴ Filtro UV adicional. Seguridad añadida durante la exploración.
- ∴ Construcción sólida con altas prestaciones diseño de «cuello de cisne» con un radio de 120 cm. Radio de operación muy amplio, fácil de posicionar, la luz permanece fija en el mismo sitio en cualquier posición seleccionada.
- ∴ El filtro IR adicional reduce el calor. Más agradable para el paciente y el examinador.

Lámpara de exploración HL 5000

12V/50W

con trípode estable sobre ruedas, metal [01]	J-005.27.106
la misma, con trípode ligero sobre ruedas, policarbonato [02]	J-005.27.108
la misma, con soporte mural [03]	J-005.27.102
la misma, con fijación por mordaza [04]	J-005.27.104
Lámpara de recambio 12V/50W [05]	J-005.27.111



Lámpara de exploración HEINE HL 1200®



- ∴ Brazo flexible
- ∴ Cabezal iluminador compacto
- ∴ 90 000 lux a 30 cm

- ∴ **Cabezal iluminador compacto.** Más libertad de movimiento y una vista no obstruida para el examinador.
- ∴ **Filtro de color incorporado.** Evita la incomodidad del paciente.
- ∴ **Supera todos los criterios relevantes de calidad.** Protección garantizada para el paciente incluso en el caso que la bombilla falle.
- ∴ **Construcción fija de la sección flexible.** Ajuste de la luz en prácticamente cualquier posición. Se queda fija, no se baja ni se cae.
- ∴ **Tripode involucable sobre ruedas.** Evita el vuelco y mejora la seguridad en la clínica o en la consulta.
- ∴ **Lámpara de 12V/20W de larga duración.** Bombilla de 4000 horas de duración.
- ∴ **Salida de luz de 90000 lux a 30 cm.** Luz brillante y blanca.

Lámpara de exploración HL1200 12V/20W	negra	blanca
con trípode sobre ruedas, metal [01]	J-005.27.068	J-005.27.067
ídem, con trípode ligero sobre ruedas, policarbonato [02]	J-005.27.078	J-005.27.077
ídem, pero además con fijación por mordaza [03]	J-005.27.056	J-005.27.058
con soporte mural, también preparada para montaje sobre trípode rodable [04]	J-005.27.052	J-005.27.054
Lámpara de recambio 12V/20W [05]	J-005.27.075	J-005.27.075

Tripode rodable suelto (metal) con fijación para lámpara HL 1200	Y-096.50.004
Tripode rodable suelto (policarbonato) con fijación para HL 1200	Y-096.50.009
Fijación para trípode, suelta	J-000.27.069



Lámpara universal de fibra óptica (F.O.) HEINE HKL®

La lámpara óptima para el consultorio. Debido a la fibra óptica no se calienta el objeto y la iluminación es siempre similar a luz natural. Para usarla con todos los proyectores F.O. de HEINE.

- ∴ **Lámpara enfocable de fibra óptica.** Campo de iluminación muy claro, absolutamente homogéneo sin generación de calor en el paciente.
- ∴ **Temperatura de color de 3800K.** Iluminación similar a la luz natural.
- ∴ **Brazo iluminador largo y flexible que se mantiene fijo en cualquier posición.**
Gran alcance, flexible en todas las direcciones. Mantiene la posición deseada.
- ∴ **Cabeza iluminadora delgada.** Visibilidad libre y libertad de movimiento.
- ∴ **Posibilidad universal de montaje.** Puede sujetarse y colocarse, según necesidad.
- ∴ **Se adapta a proyectores de luz fría ya existentes.** Convierte cada proyector de luz en una lámpara de exploración.
- ∴ **Salida de luz de 30000 lux a 20 cm con proyector HK 7000.**
- ∴ **Posibilidades de montaje:**
 - sobre trípode con ruedas [01]
 - sobre mesa con espesor máximo de 40 mm [02]
 - en tubos verticales hasta un máximo de 40 mm Ø [03]
 - en tubos horizontales de sección cuadrada hasta un máximo de 40 mm Ø [04]
 - montaje en pared con fijación mural para proyector HK 7000 [05]



Lámpara HKL


F.O.

sobre trípode con ruedas [01]	J-003.27.004
con soporte de mordaza [02] [03] [04]	J-003.27.001
con soporte de pared [05]	J-003.27.002

Mordaza negra, suelta	J-000.27.010
Mordaza blanca, suelta	J-000.27.012
Placa de soporte, suelta	J-000.27.011
Trípode con ruedas, sin placa de soporte	Y-096.50.001
Trípode con ruedas, con placa de soporte	Y-096.50.002

El proyector debe pedirse separado. Se encuentran en la página 160.

Tamaño del campo de iluminación:

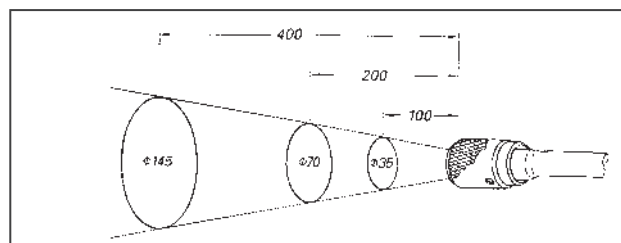


La ejecución estándar de los aparatos que se conectan a la red es de 230V. En caso de desear otra tensión, p. e. 115V, se deberá indicar en el pedido.

Una empresa escribe historia y da a su excelente calidad de producto un nombre: HEINE,

fundada en 1946, independiente, llena de tradición y hoy líder internacional del mercado, ofrece una gama completa de instrumentos de diagnóstico. Los productos HEINE cumplen con todas las normas internacionales (ISO /CE) y son líderes mundiales en precisión y diseño ergonómico. La intensa y continuada investigación de la empresa junto con el desarrollo del producto proporcionan una base sólida y orientada al futuro para una madurez técnica y una excelente calidad de todos los productos HEINE. Corresponsables de este éxito son los más de 500 colaboradores en todo el mundo.

www.heine.com

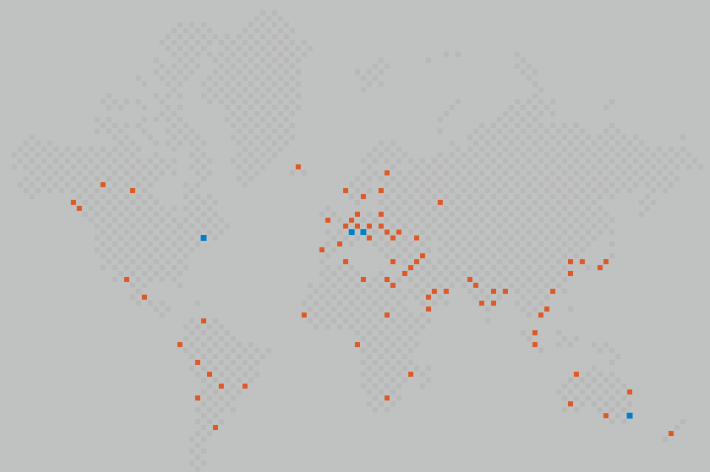

■ HEINE FILIALES
■ HEINE REPRESENTANTES

ALEMANIA

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
82211 Herrsching
Kientalstr. 7
Tel. +49 (0) 81 52-38 0
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02
E-Mail: info@heine.com

NORTEAMERICA

HEINE USA LTD.
10 Innovation Way
Dover, NH 03820
Tel. (603) 7 42-71 03
Fax (603) 7 42-72 17
Toll Free (800) 367-4872
E-Mail: service@heine-na.com

AUSTRALIA

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road
P.O. Box 717 Brookvale 2100
New South Wales
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05
E-Mail: info@heine.com.au

SUIZA

HEINE (Schweiz) AG
Tobelackerstr. 9
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: heine-schweiz@schaffhausen.ch

Su distribuidor

10/11. A-000.00.100 s

