

## Projecteur à fibre optique F.O. HEINE XENON 1000®



∴ Luminosité réglable

∴ Ampoule Xénon

∴ Température de couleur 6000K

L'extraordinaire puissance de lumière et une température de couleur de 6000K – proche de la lumière du jour – font du XENON 1000 la source de lumière de choix dans les conditions d'examen les plus exigeantes. Mesures par rapport au projecteur HK 7000. Poids : 2270g.

- ∴ **Ampoule Xénon 100W haute technologie.**
- ∴ **Durée de vie de l'ampoule jusqu'à 500 heures.**
- ∴ **Contrôle électronique de l'alimentation secteur.**
- ∴ **Optique asphérique.** Luminosité très élevée, sans ombre portée.
- ∴ **Réglage progressif de la luminosité indépendamment de la température de couleur.** Luminosité réglable selon les besoins, aucun risque de coloration rouge de la lumière.
- ∴ **Poignée rabattable.** Facilite le transport.
- ∴ **Montage mural, sur table ou sur pied à roulettes.** Agencement individuel selon les besoins.

## Projecteur F.O. XENON 1000

XENON 1000 et fusible de rechange

Y-096.15.117

Ampoule de rechange Xénon, 100W

Y-096.15.108

## Projecteur à fibre optique F.O. HEINE HK 7000®



∴ Luminosité réglable

∴ +40% Touche Turbo

Le Projecteur F.O. HK7000 comporte une ampoule spéciale longue-durée de 150W. Si l'on a besoin de plus de lumière pour un examen particulier, une touche de survoltage peut être enclenchée, donnant 40 % de lumière en plus. Peut être utilisé avec tous les instruments HEINE avec éclairage par fibres optiques.

Dimensions : Largeur 177 mm, hauteur 125 mm, profondeur 217 mm. Poids : 3 690g.

- ∴ **Lampe halogène à forte luminosité.** Eclairage optimal.
- ∴ **Optique asphérique.** Luminosité très élevée, sans ombre portée.
- ∴ **Réglage progressif de la luminosité indépendamment de la température de couleur.** Luminosité réglable selon les besoins, aucun risque de coloration rouge de la lumière.
- ∴ **Touche Turbo.** Pour 40 % de lumière en plus.
- ∴ **Ampoule longue durée.** Jusqu'à 300 heures.
- ∴ **Poignée rabattable.** Facilite le transport.
- ∴ **Montage mural, sur table ou sur pied à roulettes.** Agencement individuel selon les besoins.

## Projecteur F.O. HK 7000

HK 7000 avec ampoule XHL halogène 150W de rechange et fusible

Y-096.15.121

Fusible de rechange

Y-096.15.110

Ampoule 150W de rechange

Y-096.15.102

Support mural pour F.O. HK7000

(avec raccordement pour lampe universelle HKL)

Y-096.15.105

## Câble de fibre optique (F.O.) standard

### Pour instruments HEINE à fibres optiques



Cables fibres optiques avec poignée pour instruments HEINE à fibres optiques et projecteurs à fibres optiques, par exemple la tête d'instrument pour les tubes UniSpec à usage unique et pour les têtes d'anoscopes et de proctoscope F.O., les anoscopes, les proctoscopes et les rectoscopes. Longueur avec poignée: 180 cm.

- **Faisceau de fibres optiques de haute qualité, Ø 4 mm.** Excellente transmission de la lumière, très flexible.
- **Intérieur de la gaine en métal.** Protégé contre les pliures.
- **Extérieur de la gaine en matière plastique.** Facile à nettoyer, ne raye pas.

Câble de fibre optique standard

**Y-003.99.518**

## Pied à roulettes



Convient pour tous les projecteurs à fibre optique (F.O.) HEINE et pour certains projecteurs d'autres constructeurs.

Dimensions: Hauteur 900mm, poids 3500 g.

Plateau support: Largeur 180mm, hauteur 150mm, profondeur 240mm.

- **Pied à cinq branches de 60 cm d'empattement.** Bonne stabilité.
- **Deux roulettes à frein.** Empêche les roulements involontaires.

Pied à roulettes – sans plateau support

**Y-096.50.001**

Pied à roulettes – avec plateau support

**Y-096.50.002**



## Adaptateur entre projecteur et câble fibre optique

## Adaptateurs courts



Marque du projecteur	Marque du câble F.O.	F.O.
HEINE	Storz	Y-096.12.104
HEINE	Richard Wolf	Y-096.12.105
HEINE	ACMI	Y-096.12.107
HEINE	Olympus	Y-096.12.108
Richard Wolf	HEINE	Y-096.12.120
Storz	HEINE	Y-096.12.102
Olympus	HEINE	Y-096.12.106
Fuji	HEINE	Y-096.12.118
Pentax	HEINE	Y-096.12.119

## Adaptateur entre instrument et câble fibre optique

## Adaptateurs longs et courts



Marque de l'instrument	Marque du câble F.O.	F.O.
HEINE	Winter & Ibe Storz / Olympus*	Y-096.12.115
HEINE	Richard Wolf	Y-096.12.116
HEINE	ACMI / Olympus**	Y-096.12.117




Marque de l'instrument	Marque du câble F.O.	F.O.
HEINE	Winter & Ibe Storz / Olympus*	Y-096.12.109
HEINE	Richard Wolf	Y-096.12.111
HEINE	ACMI / Olympus**	Y-096.12.112
Winter&Ibe Storz / Olympus	HEINE	Y-096.12.113
Richard Wolf	HEINE	Y-096.12.114

\*jusqu'à 12/ 2003 \*\*après 01/ 2004

**Une entreprise est entrée dans l'histoire et a donné son nom à une production d'une qualité exceptionnelle : HEINE.**

Entreprise familiale fondée en 1946, riche en traditions, aujourd'hui leader sur le marché international, avec une gamme complète d'instruments de diagnostic. Les produits HEINE répondent à toutes les normes internationales (ISO/CE) et sont à la pointe de la technologie, tant pour la précision que pour le design et l'ergonomie. La recherche et le développement résolument tournés vers l'avenir ont su créer une base technologique solide et diversifiée pour une production d'avant-garde, dans le respect de la qualité. A travers le monde, plus de 500 employés contribuent à cette réussite.

[www.heine.com](http://www.heine.com)

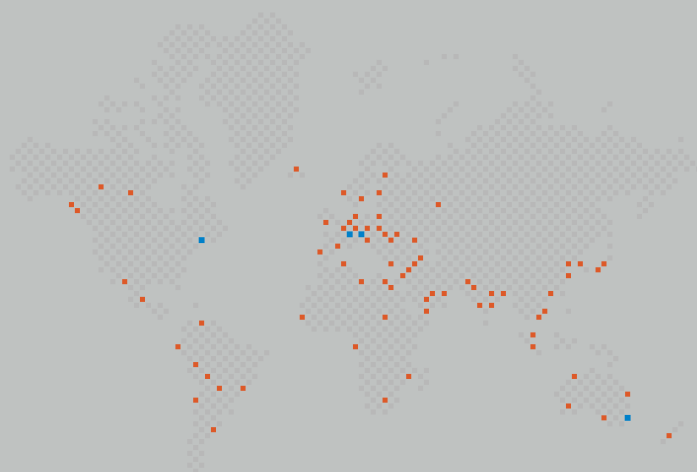

■ FILIALES HEINE  
■ DISTRIBUTEURS HEINE

**ALLEMAGNE**

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG  
82211 Herrsching  
Kientalstr. 7  
Tel. +49 (0) 81 52-38 0  
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02  
E-Mail: [info@heine.com](mailto:info@heine.com)

**ETATS-UNIS**

HEINE USA LTD.  
10 Innovation Way  
Dover, NH 03820  
Tel. (603) 7 42-71 03  
Fax (603) 7 42-72 17  
Toll Free (800) 367-4872  
E-Mail: [service@heine-na.com](mailto:service@heine-na.com)

**AUSTRALIE**

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.  
Unit 9, 98 Old Pittwater Road  
P.O. Box 717 Brookvale 2100  
New South Wales  
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00  
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05  
E-Mail: [info@heine.com.au](mailto:info@heine.com.au)

**SUISSE**

HEINE (Schweiz) AG  
Tobelackerstr. 9  
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall  
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66  
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77  
E-Mail: [heine-schweiz@schaffhausen.ch](mailto:heine-schweiz@schaffhausen.ch)

Votre distributeur

10/11. A-000.00.100 f

