

Dermatoscopes

DES IMAGES PARFAITES ET DES RESULTATS LES PLUS CLAIRS AVEC OPTIQUE DE PRECISION HAUTE RESOLUTION ET ECLAIRAGE PAR LED.

La reconnaissance précoce du Mélanome Malin devient de plus en plus importante en Dermatologie. En Allemagne, l'augmentation annuelle de nouveaux cas signalés est de 5 à 10%. Dans les régions du monde à population blanche, le taux a pratiquement doublé dans les quinze dernières années. Reconnaissance et diagnostic précoces, sont la clé de l'accroissement du taux des guérisons.

Leader du marché depuis de nombreuses années dans le secteur de la dermatoscopie, HEINE Optotechnik définit un nouveau standard avec le dermatoscope HEINE DELTA20®.

ECLAIRAGE LED

Le DELTA20 avec éclairage complet par 6 LED ou éclairage latéral par 3LED, combiné avec une optique de précision haute résolution à lentilles achromatiques, est l'aboutissement du travail continu de l'équipe d'ingénieurs « recherche et développement » de HEINE.



ENREGISTREMENTS PHOTOGRAPHIQUES NUMERIQUES EN DERMATOSCOPIE

Grâce à l'adaptateur photo HEINE SLR, il est possible d'effectuer des photographies de très brillante qualité tant dans le domaine dermatoscopique que dans le domaine clinique.





∴ Eclairage LED homogène

∴ Optique de précision excellente

∴ Photographie numérique



Dermatoscope HEINE DELTA 20®



Dermatoscope avec éclairage LED, proche de la lumière du jour

Sert à l'examen par microscopie lumineuse des dermatoses pigmentaires pour l'identification précoce de mélanomes malins. Les couches supérieures de l'épiderme sont rendues transparentes par l'application d'huile de dermatoscopie. L'examen avec DELTA 20 met en évidence les anomalies pigmentaires et autres symptômes de mélanome malin grâce à un grossissement de 10 fois. Le diagnostic différentiel de mélanomes malins débutants et d'autres lésions épidermiques est ainsi facilité et plus fiable.

- ∴ **Optique de précision haute résolution avec système de lentilles achromatiques.** Grossissement 10x, image claire, sans distorsion de la zone examinée, champ de vision exceptionnel.
- ∴ **Eclairage LED, proche de la lumière du jour.** Eclairage par 6 LED, alternativement éclairage latéral par 3 LED pour un meilleur contraste, d'une durée de vie pratiquement illimitée.
- ∴ **Oculaire.** Mise au point parfaite, correction de -6 à +6 dpt.
- ∴ **Précis d'utilisation comportant un atlas avec des photos en couleurs.** Simplifie le diagnostic différentiel des lésions pigmentaires.
- ∴ **Photographie numérique** avec adaptateur photo SLR pour appareil photographique reflex numérique.

Dermatoscope DELTA 20	2,5V/3,5V LED
avec précis de dermatoscopie, embout de contact 23 mm Ø avec échelle, sans poignée	K-008.34.201
idem, sans échelle, sans poignée	K-008.34.207
Dermatoscope DELTA 20 sans embout de contact	K-008.34.202


Trousse complète avec: **Dermatoscope DELTA 20**
embout de contact 23 mm Ø avec échelle
10 ml d'huile de dermatoscopie,
précis de dermatoscopie
étui rigide

Troussets DELTA 20	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V 
poignée à piles BETA	K-256.10.118		
BETA R Poignée rechargeable pour prise de courant		K-256.20.376	K-256.27.376
BETA TR Poignée rechargeable avec transformateur à fiche		K-256.20.384	K-256.27.384
poignée rechargeable BETA NT et chargeur NT 300		K-256.20.420	
 Poignée rechargeable BETA L et chargeur NT 300			K-256.29.420

 : Poignée rechargeable avec affichage du statut de charge dans le culot.

Accessoires

pour Dermatoscope DELTA 20

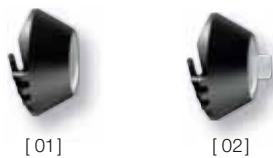

Embout de contact

23 mm Ø, sans graduations [01]	K-000.34.203
23 mm Ø, avec graduations [01]	K-000.34.204
Petit embout de contact, 8 mm Ø [02] pour l'examen de lésions difficiles d'accès	K-000.34.205



Huile de dermatoscopie

en boîte de 6 (6 x 10 ml), rend les couches externes de l'épiderme transparentes pendant l'examen	K-000.34.005
---	--------------



Adaptateur Photo SLR

pour dermatoscope / appareil photo numérique SLR, avec optique. Grand champ de vision, image très nette

Adaptateur photo SLR pour Canon	K-000.34.185
idem, pour Nikon	K-000.34.186
idem, pour Olympus	K-000.34.187



Câble de liaison

(1,3m) entre poignée et DELTA 20	X-000.99.231
----------------------------------	--------------



Etui Ceinture BETA

pour poignée BETA	X-000.99.008
-------------------	--------------



Trousse d'accessoires photo

comprenant Adaptateur Photo SLR, câble de liaison, bague de distance et Etui Ceinture BETA

Trousse d'accessoires photo pour Canon	K-000.34.190
idem, pour Nikon	K-000.34.191
idem, pour Olympus	K-000.34.192

Dermatoscope HEINE mini3000®

Dermatoscope en format de poche



∴ Dermatoscope de poche moderne

∴ Tête métallique

∴ Poignée rechargeable optionnelle

Dermatoscope de poche moderne, avec un design compact et une optique de haute qualité. Grossissement 10x, avec mise au point de l'optique. Système de verrouillage par rotation.

Uniquement combinable avec le système de poignée mini3000.

Poignée livrable en noir ou bleu.

- ∴ **Grossissement 10x.** Image grande et riche en détails.
- ∴ **Pièce de construction principale en métal.** Solide, grande longévité.
- ∴ **Technologie améliorée de lampes XHL Xénon Halogène pour plus de lumière.** Lumière concentrée, blanche, très claire pour un éclairage optimal.
- ∴ **Clip de fixation avec interrupteur intégré.** Bonne prise en main de l'instrument. S'éteint automatiquement quand on le remet en poche. 20.000 cycles marche/arrêt garantis.
- ∴ **Poignée de haute qualité: Finition chromée/plastique inégalable.** Résistant aux chocs, robuste, antidérapant.
- ∴ **Précis d'utilisation comportant un atlas avec des photos en couleurs.** Simplifie le diagnostic différentiel des lésions pigmentaires.
- ∴ **Piles échangeables de type AA,** ou batterie rechargeable avec chargeur miniNT en option*.

Dermatoscope mini 3000	2,5V
avec embout de contact, poignée à piles mini3000 et huile de dermatoscopie (10ml), avec piles	D-001.78.107
avec embout de contact avec graduations , poignée à piles mini3000 et huile de dermatoscopie (10ml), avec piles	D-001.78.109
avec embout de contact, avec ampoule, sans poignée	D-001.78.106
avec embout de contact avec graduations , avec ampoule, sans poignée	D-001.78.108



Ampoule de rechange XHL Xénon halogène	X-001.88.109
--	---------------------

*Afin de modifier l'instrument en rechargeable par moyen du chargeur miniNT, voir page 148.

Accessoires

pour Dermatoscopes mini3000



[01]



[02]

Embout de contact	
sans graduations [01]	D-000.78.116
avec graduations [01]	D-000.78.117
Petit embout de contact, 8mm Ø [02] pour l'examen de lésions difficiles d'accès	K-000.34.008




Huile de dermatoscopie	
en boîte de 6 (6 x 10ml), rend les couches externes de l'épiderme transparentes pendant l'examen	K-000.34.005

Une entreprise est entrée dans l'histoire et a donné son nom à une production d'une qualité exceptionnelle : HEINE.

Entreprise familiale fondée en 1946, riche en traditions, aujourd'hui leader sur le marché international, avec une gamme complète d'instruments de diagnostic. Les produits HEINE répondent à toutes les normes internationales (ISO/CE) et sont à la pointe de la technologie, tant pour la précision que pour le design et l'ergonomie. La recherche et le développement résolument tournés vers l'avenir ont su créer une base technologique solide et diversifiée pour une production d'avant-garde, dans le respect de la qualité. A travers le monde, plus de 500 employés contribuent à cette réussite.

www.heine.com

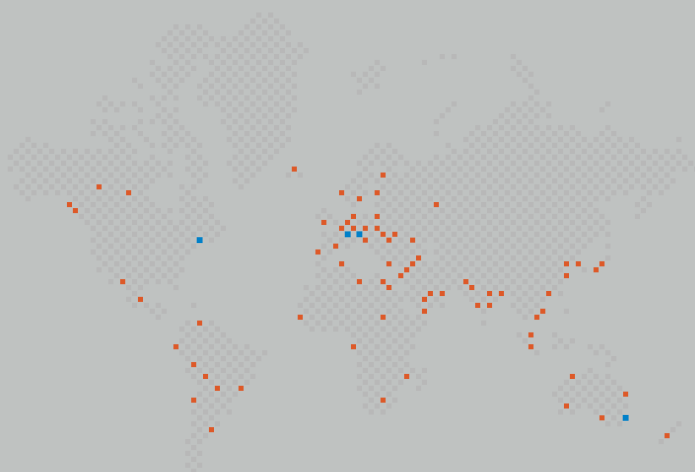

■ FILIALES HEINE
■ DISTRIBUTEURS HEINE

ALLEMAGNE

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
82211 Herrsching
Kientalstr. 7
Tel. +49 (0) 81 52-38 0
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02
E-Mail: info@heine.com

ETATS-UNIS

HEINE USA LTD.
10 Innovation Way
Dover, NH 03820
Tel. (603) 7 42-71 03
Fax (603) 7 42-72 17
Toll Free (800) 367-4872
E-Mail: service@heine-na.com

AUSTRALIE

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road
P.O. Box 717 Brookvale 2100
New South Wales
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05
E-Mail: info@heine.com.au

SUISSE

HEINE (Schweiz) AG
Tobelackerstr. 9
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: heine-schweiz@schaffhausen.ch

Votre distributeur

10/11. A-000.00.100 f

