

Handgehaltenes Skiaskop zur objektiven Refraktion.
Mit dem BETA 200 Skiaskop wird die Refraktion des Auges gemessen. Brechungsfehler wie Kurz- und Weitsichtigkeit sowie Astigmatismus können erkannt und bestimmt werden.

Zwei Instrumentenausführungen stehen hierbei zur Verfügung: Das Fleck-Skiaskop mit einem kreisförmigen Lichtstrahl und das allgemein gängige Strich-Skiaskop mit einem strichförmigen Lichtstrahl, der die Erkennung der Refraktion erleichtert.

HEINE ParaStop® und Polarisationsfilter.
Das BETA 200 Skiaskop mit ParaStop und modernster mehrfach vergüteter Optik führt zu einem außergewöhnlich hellen Fundusreflex, um den Flackerpunkt leichter zu erkennen. ParaStop ist eine HEINE-Entwicklung zur mühelosen, präzisen Einstellung des parallelen Strahlenganges. Mit ParaStop wird das Aufsuchen der Zylinderachse einfacher, schneller und exakter als bisher. Auch die Prüfung der Zylinderkorrektur nach Brillenanpassung wird durch ParaStop genauer und rascher.

HEINE BETA 200® Skiaskop mit HEINE ParaStop®

Präzision bei der Einstellung des parallelen Strahlenganges



[01]

- ∴ **ParaStop.** Präzise Einstellung des parallelen Strahlenganges.
- ∴ **Ergonomische Form.** Gute Abdeckung der Orbita, Streulicht weitgehend eliminiert.
- ∴ **XHL Xenon Halogentechnologie.** Helles, weißes Licht. Heller Fundusreflex, leichtes Erkennen des Flackerpunktes.
- ∴ **Strich- und Fleck-Skiaskop.** Durch einfachen Lampenwechsel.
- ∴ **Bedienelemente aus Metall.** Langlebig, hohe Qualität.
- ∴ **Ein einziges Bedienelement für Vergenz und Strichrotation.** Bequeme Bedienung mit dem Daumen.
- ∴ **Staubdicht.** Wartungsfrei.
- ∴ **Integriertes Polarisationsfilter.** Eliminiert Streulicht und interne Reflexe.
- ∴ **Aufsteckbares Orangefilter (optional).** Vermindert Irritation des Patienten ohne Beeinträchtigung des Fundusreflexes.
- ∴ **Stirnauflage für Brillenträger.** Praktisch und stabilisierend.
- ∴ **Halterung für Fixationskarten (optional).** Für dynamische Skiaskopie.

BETA 200 Strich-Skiaskop	2,5V	3,5V
mit XHL Xenon Halogenlampe, ohne Griff	C-001.15.353	C-002.15.353
XHL Xenon Halogen Ersatzlampe	X-001.88.087	X-002.88.089
XHL Xenon Halogen Ersatzlampe für Umbau zum Fleck-Skiaskop	X-001.88.088	X-002.88.090



Aufsteckbares Orangefilter für die Lampe, für lichtempfindliche Patienten [01]	C-000.15.359
Fixationskarten mit Halter für dynamische Skiaskopie	C-000.15.360

- ∴ **Patentiertes ParaStop®**
- ∴ **Bedienelemente aus Metall**
- ∴ **Staubdicht**
- ∴ **Strich- und Fleck-Skiaskop:**
Durch einfachen Lampenwechsel.

HEINE Ophthalmologische Diagnostik Sets





Set komplett mit: **BETA 200 Strich-Skiaskop**
1 Ersatzlampe
Hartschalenetui

BETA 200 Skiaskop Sets	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V 
BETA Batteriegriff	C-034.10.118*		
BETA R Ladegriff für Steckdose		C-034.20.376	C-034.27.376
BETA TR Ladegriff mit Steckertrafo		C-034.20.384	C-034.27.384
BETA NT Ladegriff und NT 300 Ladegerät		C-034.20.420	
 BETA L Ladegriff und NT 300 Ladegerät			C-034.29.420



Set komplett mit: **BETA 200 S Ophthalmoskop, BETA 200 Strich-Skiaskop**
je 1 Ersatzlampe
Hartschalenetui

BETA Diagnostik Sets	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V 
BETA Batteriegriff	C-262.10.118*		
BETA R Ladegriff für Steckdose		C-262.20.376	C-262.27.376
BETA TR Ladegriff mit Steckertrafo		C-262.20.384	C-262.27.384
BETA NT Ladegriff und NT 300 Ladegerät		C-262.20.420	
 BETA L Ladegriff und NT 300 Ladegerät			C-262.29.420


*Auch mit großem Batteriegriff **X-001.99.120** lieferbar, bitte bei Bestellung angeben. (Passt nicht in Hartschalenetuis.)

: Ladegriff mit Ladestandsanzeige in der Bodeneinheit.

Ein Unternehmen schreibt Geschichte und gibt seiner ausgezeichneten Produkt-Qualität einen Namen: HEINE.

1946 gegründet, unabhängig, traditionsreich und heute internationaler Marktführer und Komplettanbieter von Diagnostikinstrumenten. HEINE Produkte erfüllen alle internationalen Standards (ISO/CE) und sind in Präzision und ergonomischem Design weltweit führend. Die intensive und kontinuierliche unternehmenseigene Forschung und Produktentwicklung schaffen eine solide und zukunftsweisende Basis für die technische Reife und die ausgezeichnete Qualität aller HEINE Produkte. Mitverantwortlich für diesen Erfolg sind weltweit über 500 Mitarbeiter.

www.heine.com

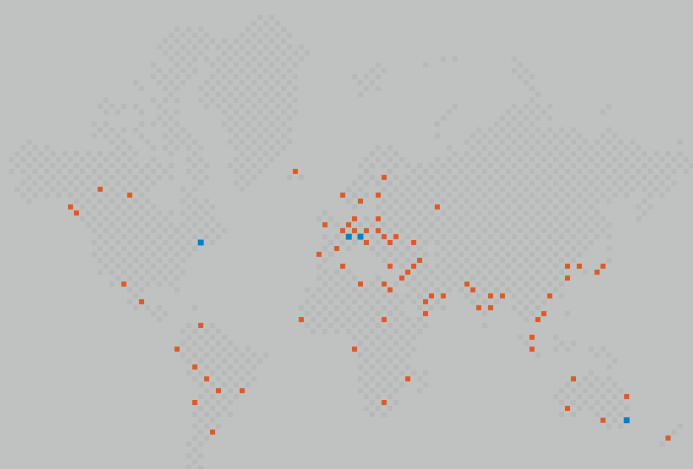

■ HEINE NIEDERLASSUNGEN
■ HEINE VERTRETUNGEN

DEUTSCHLAND

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
82211 Herrsching
Kientalstr. 7
Tel. +49 (0) 81 52-38 0
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02
E-Mail: info@heine.com

NORDAMERIKA

HEINE USA LTD.
10 Innovation Way
Dover, NH 03820
Tel. (603) 7 42-71 03
Fax (603) 7 42-72 17
Toll Free (800) 367-4872
E-Mail: service@heine-na.com

AUSTRALIEN

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road
P.O. Box 717 Brookvale 2100
New South Wales
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05
E-Mail: info@heine.com.au

SCHWEIZ

HEINE (Schweiz) AG
Tobelackerstr. 9
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: heine-schweiz@schaffhausen.ch

Ihr Fachhändler

10/11. A-000.00.100 d

