

La più alta qualità ottica e le diagnosi più accurate.

Gli strumenti oftalmici HEINE definiscono gli standard di riferimento per qualità ottica e accuratezza diagnostica. Il range HEINE include un'ampia varietà di strumenti oftalmici di alta qualità per tutti gli esami generali e specialistici degli occhi: oftalmoscopi diretti e indiretti, strumenti oftalmici specialistici come retinoscopi, retinometri, lampade a fessura manuali, lampade manuali per visita oftalmologica.

Gli innovativi oftalmoscopi HEINE beneficiano di numerosi brevetti e marchi registrati. Le caratteristiche principali: Il sistema ottico asferico (AOS) negli oftalmoscopi diretti HEINE BETA®, la funzione ParaStop® nel retinoscopio HEINE e le regolazioni simultanee di convergenza e parallasse negli oftalmoscopi indiretti HEINE OMEGA®.

HEINE ParaStop® e filtro polarizzatore.

Il retinoscopio BETA 200 con ParaStop ed ottica antiriflessi, produce un'immagine eccezionalmente chiara del riflesso retinico ed una facile individuazione del punto di neutralizzazione. Il retinoscopio BETA 200 con ParaStop consente la selezione istantanea e precisa di un fascio di raggi di luce paralleli. Riconoscere l'asse del cilindro con ParaStop è più facile e rapido. Nella prescrizione degli occhiali il controllo della correzione cilindrica è più preciso e veloce con ParaStop.

Retinoscopio HEINE BETA 200® con HEINE ParaStop®

Precisa selezione di un fascio di raggi paralleli



- ∴ **ParaStop.** Per una selezione istantanea e precisa di un fascio di raggi di luce paralleli.
- ∴ **Forma ergonomica.** Si adatta alla cavità orbitale proteggendo da luci laterali l'occhio dell'osservatore.
- ∴ **Tecnologia alogena XHL Xenon.** Luce bianca e chiara: Nitido riflesso retinico.
- ∴ **Uno strumento sia per retinoscopia a fessura che a spot.** È sufficiente cambiare la lampadina.
- ∴ **Elemento di comando in metallo.** Di alta qualità e lunga durata.
- ∴ **Un solo comando per convergenza e rotazione.** Di facile utilizzo con il solo pollice.
- ∴ **Tenuta ermetica.** Elimina la manutenzione.
- ∴ **Filtro polarizzatore integrato.** Elimina riflessi interni e luci parassite.
- ∴ **Filtro arancione applicabile alla lampadina (optional).** Riduce irritazioni al paziente senza compromettere i riflessi del fondo oculare.
- ∴ **Distanziatore rimovibile.** Maggior comfort e controllo durante la visita.
- ∴ **Fessure per cartoncini di fissazione (optional).** Per una retinoscopia dinamica.

Retinoscopio a Fessura BETA 200	2,5V	3,5V
con lampadina XHL Xenon alogena, senza manico	C-001.15.353	C-002.15.353
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.087	X-002.88.089
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena per convertire in retinoscopio a spot	X-001.88.088	X-002.88.090



Filtro arancione per la lampadina, per pazienti particolarmente sensibili alla luce [01]	C-000.15.359
Cartoncini di fissazione con supporto per retinoscopia dinamica	C-000.15.360

- ∴ **ParaStop® brevettato**
- ∴ **Elemento di comando in metallo**
- ∴ **Tenuta ermetica antipolvere**
- ∴ **Retinoscopio a fessura o a spot semplicemente cambiando la lampadina**

Set Diagnostici per Oftalmologia HEINE





Set completo con: **Retinoscopio a fessura BETA 200**
lampadina di ricambio
astuccio rigido

Set Retinoscopio BETA 200	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V 
BETA Manico a batterie	C-034.10.118*		
BETA R Manico ricaricabile, per presa a rete		C-034.20.376	C-034.27.376
BETA TR Manico ricaricabile con trasformatore a rete		C-034.20.384	C-034.27.384
BETA NT Manico ricaricabile e caricatore NT 300		C-034.20.420	
 BETA L Manico ricaricabile e caricatore NT 300			C-034.29.420



Set completo con: **Oftalmoscopio BETA 200 S, Retinoscopio a fessura BETA 200**
lampadina di ricambio per ogni strumento
astuccio rigido

Set Diagnostici BETA	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V 
BETA Manico a batterie	C-262.10.118*		
BETA R Manico ricaricabile, per presa a rete		C-262.20.376	C-262.27.376
BETA TR Manico ricaricabile con trasformatore a rete		C-262.20.384	C-262.27.384
BETA NT Manico ricaricabile e caricatore NT 300		C-262.20.420	
 BETA L Manico ricaricabile e caricatore NT 300			C-262.29.420

*A richiesta fornibili anche con manico grande X-001.99.120 in astuccio dedicato, si prega di precisarlo sull'ordine.

: Manico ricaricabile con display indicatore dello stato di carica sulla base.

Un'azienda che ha fatto storia e ha dato il proprio nome a prodotti di qualità: HEINE.

Fondata nel 1946, di proprietà familiare, ricca di tradizioni ed oggi leader internazionale di mercato, con una completa gamma di strumenti diagnostici. I prodotti HEINE sono conformi agli standard internazionali (ISO/CE) e rappresentano il massimo della precisione e del design ergonomico. Un costante impegno nella ricerca e sviluppo è alla base di una solida e diversificata tecnologia a garanzia della qualità dei prodotti HEINE. Oltre 500 collaboratori nel mondo contribuiscono a questo successo.

www.heine.com

GERMANIA

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
82211 Herrsching
Kientalstr. 7
Tel. +49 (0) 81 52-38 0
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02
E-Mail: info@heine.com

NORD AMERICA

HEINE USA LTD.
10 Innovation Way
Dover, NH 03820
Tel. (603) 7 42-71 03
Fax (603) 7 42-72 17
Toll Free (800) 367-4872
E-Mail: service@heine-na.com

AUSTRALIA


HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road
P.O. Box 717 Brookvale 2100
New South Wales
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05
E-Mail: info@heine.com.au

SVIZZERA

HEINE (Schweiz) AG
Tobeläckerstr. 9
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: heine-schweiz@schaffhausen.ch

ITALIA

INTERMED S.R.L.
Attrezzature e Strumenti Medicali
Via della Pace 21
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39 02 98 24 80 16
Fax +39 02 98 24 73 61
E-Mail: info@intermeditalia.it

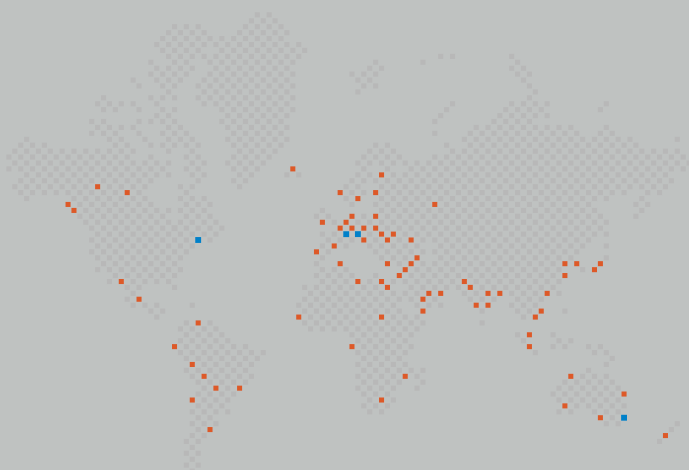

■ FILIALI HEINE
■ RAPPRESENTANTI HEINE

