

Dermatoscopi

DETTAGLI DEFINITI E RISULTATI PIÙ CHIARI CON OTTICHE DI PRECISIONE AD ALTA RISOLUZIONE E ILLUMINAZIONE A LED.

La diagnosi precoce del melanoma maligno è sempre più importante in dermatologia. Il tasso annuo di aumento dei nuovi casi è compresa tra 5-10%. Negli ultimi 15 anni l'aumento internazionale di casi di melanoma è quasi raddoppiato in tutti i paesi con una popolazione bianca. Una diagnosi precoce spesso significa un esito positivo.

Da molti anni ormai HEINE è il leader di mercato in dermatoscopia con il dermatoscopio di riferimento HEINE DELTA 20®.

ILLUMINAZIONE LED

DELTA 20® con illuminazione totale a 6 LED o laterale a 3 LED, unitamente ad ottiche di precisione ad alta risoluzione con lenti acromatiche, è il risultato di una specifica ricerca e sviluppo del nostro team di ingegneri.



FOTO DIGITALI IN DERMATOSCOPIA

Con l'adattatore fotografico HEINE SLR sono possibili brillanti immagini fotografiche di alta qualità sia in dermatoscopia che in ambito clinico.





∴ Illuminazione a LED omogenea

∴ Ottiche di precisione

∴ Fotografie digitali



Dermatoscopio HEINE DELTA 20®

Dermatoscopio con illuminazione a LED

Per dermatoscopia a contatto di lesioni pigmentate e per la diagnosi precoce di melanomi cutanei maligni. L'olio per dermatoscopia viene applicato sulle lesioni cutanee rendendole trasparenti. DELTA 20 rende visibili i cambiamenti strutturali e permette all'esaminatore di riconoscere variazioni nel reticolo pigmentario. La precoce rilevazione e diagnosi differenziale di un melanoma maligno e di altre condizioni sono con DELTA 20 più attendibili e facilitate.

- ∴ **Ottiche di precisione ad alta risoluzione con lenti acromatiche.** Ingrandimento 10x, immagine nitida, priva di distorsioni, ampia e dettagliata.
- ∴ **Illuminazione a LED simile alla luce naturale.** 6 LED o, in alternativa, illuminazione laterale a 3 LED per un maggior contrasto; durata quasi illimitata.
- ∴ **Oculare.** Messa a fuoco con range di correzione da - 6 a + 6 D.
- ∴ **Dettagliato compendio con atlante fotografico incluso.** Facilita la diagnosi differenziale delle lesioni pigmentate.
- ∴ **Foto digitali con il dermatoscopio** in combinazione con il fotoadattatore HEINE SLR montato su Fotocamere Digitali Reflex SLR: Canon, Nikon e Olympus.

Dermatoscopio DELTA 20	2,5V/3,5V LED
con piastrina di contatto Ø 23mm con scala e compendio di dermatoscopia, senza manico	K-008.34.201
idem, ma con piastrina senza scala millimetrata, senza manico	K-008.34.207
Dermatoscopio DELTA 20 senza piastrina di contatto	K-008.34.202

Set completo con Dermatoscopio DELTA 20


piastrina contatto Ø 23mm con scala
10ml di olio per dermatoscopia
compendio
valigetta rigida

Set DELTA 20	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V (Li ION)
BETA Manico a batterie	K-256.10.118		
BETA R Manico ricaricabile, per presa a rete		K-256.20.376	K-256.27.376
BETA TR Manico ricaricabile con trasformatore a rete		K-256.20.384	K-256.27.384
BETA NT Manico ricaricabile e caricatore NT300		K-256.20.420	
Ⓛ BETA L Manico ricaricabile e caricatore NT300			K-256.29.420

Ⓛ: Manico ricaricabile con display indicatore dello stato di carica sulla base.

Accessori

Per dermatoscopio DELTA 20

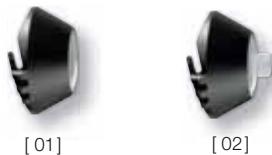
Piastrina di contatto

Ø 23mm senza scala millimetrata [01]	K-000.34.203
Ø 23mm con scala millimetrata [01]	K-000.34.204
Piastrina di contatto piccola, Ø 8mm, [02] per l'esame di lesioni poco accessibili	K-000.34.205


Olio per dermatoscopia

(confezione da 6 pezzi x 10ml). Si applica sulle lesioni cutanee, rendendole trasparenti	K-000.34.005
--	--------------


Foto adattatore SLR

completo di ottica per la connessione del dermatoscopio DELTA 20 a fotocamere digitali reflex SLR. Già predisposto di ghiera, si aggancia direttamente al corpo macchina. Ampio campo di visione, immagine nitida.

Foto adattatore SLR per Canon	K-000.34.185
idem, per Nikon	K-000.34.186
idem, per Olympus	K-000.34.187


Cavo di connessione

(1,3m) tra dermatoscopio e manico	X-000.99.231
-----------------------------------	--------------


Portamanico BETA

con clip da cintura	X-000.99.008
---------------------	--------------


Set con accessori per fotografia

contiene il foto adattatore SLR, cavo di connessione, anello distanzatorio e Clip da cintura

Set con accessori per fotografia per Canon	K-000.34.190
idem, per Nikon	K-000.34.191
idem, per Olympus	K-000.34.192

Dermatoscopio HEINE mini 3000®

Dermatoscopio in formato tascabile



∴ Dermatoscopio tascabile

∴ Struttura in metallo

∴ Optional manico ricaricabile

Moderno dermatoscopio tascabile dal design compatto con ottica di qualità. Ingrandimento 10x con regolazione della messa a fuoco. Attacco a vite in metallo. Compatibile solo con i manici mini 3000. Manico disponibili in nero e blu.

- ∴ **10x ingrandimenti.** Grande campo, ricchezza di dettagli.
- ∴ **Solida costruzione in metallo.** Robusto e di lunga durata.
- ∴ **Tecnologia alogena XHL Xenon migliorata per una maggiore luminosità.** Luce bianca e concentrata per un'illuminazione eccellente.
- ∴ **Clip con interruttore integrato acceso/spento.** Spegnimento automatico quando si aggancia al taschino. 20.000 accensioni garantite.
- ∴ **Pregiata struttura in lega al cromo/plastica arricchita.** Antiurto, robusta, a presa sicura.
- ∴ **Dettagliato compendio con atlante fotografico incluso.** Facilita la diagnosi differenziale delle lesioni pigmentate.
- ∴ **Batterie sostituibili.** Grandezza AAA, o optional batteria ricaricabile con caricatore miniNT*.

Dermatoscopio mini 3000	2,5V
con piastrina di contatto senza scala, manico a batterie mini 3000, e 10ml di olio per dermatoscopia, con batterie	D-001.78.107
con piastrina di contatto con scala , manico a batterie mini 3000, e 10ml di olio per dermatoscopia, con batterie	D-001.78.109
con piastrina di contatto, con lampadina, senza manico	D-001.78.106
con piastrina di contatto con scala , con lampadina, senza manico	D-001.78.108

Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.109
---	--------------



*Per aggiornare in uno strumento ricaricabile, con il caricatore mini NT, prego vedere pag. 148.

Accessori

Per dermatoscopi mini 3000



[01]



[02]

Piastrina di contatto

Piastrina di contatto senza scala millimetrata [01]	D-000.78.116
Piastrina di contatto con scala millimetrata [01]	D-000.78.117
Piastrina di contatto piccola, Ø 8mm, [02] per l'esame di lesioni poco accessibili	K-000.34.008

Olio per dermatoscopia

(confezione da 6 pezzi x 10ml). Si applica sulle lesioni cutanee, rendendole trasparenti	K-000.34.005
--	--------------



Un'azienda che ha fatto storia e ha dato il proprio nome a prodotti di qualità: HEINE.

Fondata nel 1946, di proprietà familiare, ricca di tradizioni ed oggi leader internazionale di mercato, con una completa gamma di strumenti diagnostici. I prodotti HEINE sono conformi agli standard internazionali (ISO/CE) e rappresentano il massimo della precisione e del design ergonomico. Un costante impegno nella ricerca e sviluppo è alla base di una solida e diversificata tecnologia a garanzia della qualità dei prodotti HEINE. Oltre 500 collaboratori nel mondo contribuiscono a questo successo.

www.heine.com

GERMANIA

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
82211 Herrsching
Kientalstr. 7
Tel. +49 (0) 81 52-38 0
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02
E-Mail: info@heine.com

NORD AMERICA

HEINE USA LTD.
10 Innovation Way
Dover, NH 03820
Tel. (603) 7 42-71 03
Fax (603) 7 42-72 17
Toll Free (800) 367-4872
E-Mail: service@heine-na.com

AUSTRALIA


HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road
P.O. Box 717 Brookvale 2100
New South Wales
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05
E-Mail: info@heine.com.au

SVIZZERA

HEINE (Schweiz) AG
Tobeläckerstr. 9
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: heine-schweiz@schaffhausen.ch

ITALIA

INTERMED S.R.L.
Attrezzature e Strumenti Medicali
Via della Pace 21
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39 02 98 24 80 16
Fax +39 02 98 24 73 61
E-Mail: info@intermeditalia.it

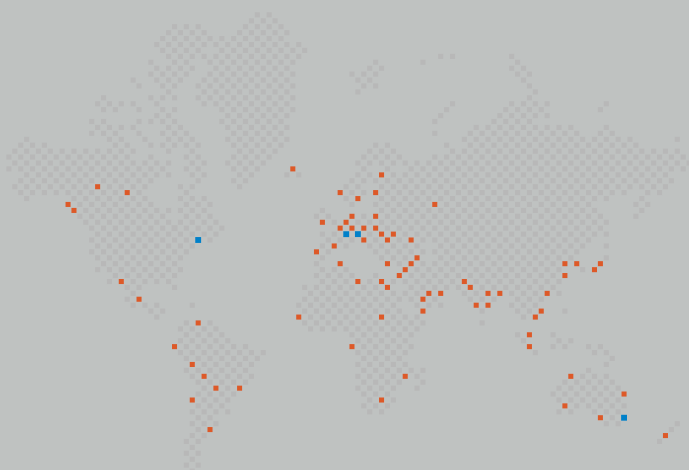

■ FILIALI HEINE
■ RAPPRESENTANTI HEINE

