

Proiettore a fibre ottiche (F.O.) HEINE XENON 1000®



La straordinaria luminosità erogata sino a 125.000 lux e la temperatura di colore di 6000K – vicina alla luce naturale – fanno di XENON 1000 la fonte di luce da scegliere nelle più impegnative condizioni d'esame. Dimensioni come HK7000. Peso: 2270g.

- ∴ **Lampadina Xenon ad alta tecnologia 100 Watt.** Vicina alla luce naturale.
- ∴ **Durata media della lampadina 500 ore.**
- ∴ **Controllo elettronico del voltaggio.**
- ∴ **Ottica di illuminazione asferica.** Alta intensità luminosa priva di ombre.
- ∴ **Controllo della luminosità senza variazione del colore di temperatura.** Riduzione della luminosità senza tendenza al rosso della luce.
- ∴ **Maniglia per il trasporto riponibile.** Facilità di trasporto.
- ∴ **Da tavolo, parete o su stativo.** Adattabile alle varie esigenze.

∴ Controllo della luminosità

∴ Lampadina Xenon

∴ Temperatura di colore di 6000K

Proiettore a F.O. XENON 1000

XENON 1000, con fusibile di ricambio incluso

Y-096.15.117

Lampadina di ricambio Xenon 100W

Y-096.15.108

Proiettori a (F.O.) HEINE HK 7000®



Il proiettore a F.O. HK 7000 è dotato di una speciale lampadina alogena di lunga durata a 150 Watt. Se fosse necessaria una maggior luminosità per particolari esami, tramite un interruttore è possibile incrementare la luce sino al 40 % in più. Indicato per tutti gli strumenti HEINE a F.O.

Dimensioni: Larghezza 177 mm, Altezza 125mm, Profondità 217 mm. Peso: 3690g.

- ∴ **Lampadina alogena a forte intensità.** Ottimale illuminazione.
- ∴ **Ottica di illuminazione asferica.** Alta intensità luminosa priva di ombre.
- ∴ **Controllo della luminosità senza variazione del colore di temperatura.** Riduzione della luminosità senza tendenza al rosso della luce.
- ∴ **Incremento luminosità.** Sino al 40 % di luce in più.
- ∴ **Lampadina alogena di lunga durata.** 300 ore di lavoro.
- ∴ **Maniglia per il trasporto, riponibile.** Facilità di trasporto.
- ∴ **Da tavolo, parete o su stativo.** Adattabile alle varie esigenze.

∴ Controllo della luminosità

∴ +40% Incremento della luminosità

Proiettore a F.O. HK 7000

HK7000, con lampadina 150W e due fusibili di ricambio inclusi

Y-096.15.121

Fusibile di ricambio

Y-096.15.110

Lampadina di ricambio 150W

Y-096.15.102

Dispositivo per fissaggio a muro,
(incluso adattatore per lampada a fibre ottiche HKL)

Y-096.15.105

Cavo a fibre ottiche standard per proiettori a F.O. HEINE

Per strumenti HEINE a F.O.



Cavo con manico per l'uso di strumenti HEINE a F.O. con il Proiettore F.O. (Testina per Tubi UniSpec, Testina F.O. per Ano-Proctoscopi, Aoscopi, Proctoscopi, Rettoscopi F.O. Riutilizzabili). Lunghezza incluso manico: 180cm

- **4 mm di fascio di fibre ottiche di alta qualità.** Eccezionale trasmissione di luce. Alta flessibilità.
- **Rivestimento interno in metallo.** Resistente alle piegature.
- **Rivestimento esterno in plastica.** Di facile pulizia.

Cavo a fibre ottiche standard

Y-003.99.518

Stativo a rotelle



Indicato per tutti i proiettori a luce fredda HEINE o di altre produzioni.

Dimensioni: Altezza: 900mm, peso: 3500g.

Porta proiettore: Larghezza 180mm, Altezza 150mm, Profondità 240mm.

- **5 razze con 60cm di estensione.** Massima stabilità.
- **2 ruote frenanti.** Bloccaggio sicuro dello stativo.

Stativo a rotelle, senza porta proiettore

Y-096.50.001

Stativo a rotelle, con porta proiettore

Y-096.50.002

Adattatori tra proiettori e cavi a F.O.

Adattatori corti



| Proiettore produzione | Cavo a F.O. produzione | F.O. |
|-----------------------|------------------------|--------------|
| HEINE | Storz | Y-096.12.104 |
| HEINE | Richard Wolf | Y-096.12.105 |
| HEINE | ACMI | Y-096.12.107 |
| HEINE | Olympus | Y-096.12.108 |
| Richard Wolf | HEINE | Y-096.12.120 |
| Storz | HEINE | Y-096.12.102 |
| Olympus | HEINE | Y-096.12.106 |
| Fuji | HEINE | Y-096.12.118 |
| Pentax | HEINE | Y-096.12.119 |

Adattatori tra strumenti e cavi a F.O.

Manici adattatori - adattatori corti



| Strumento produzione | Cavo a F.O. produzione | F.O. |
|----------------------|----------------------------------|--------------|
| HEINE | Winter & Ibe Storz / Olympus* | Y-096.12.115 |
| HEINE | Richard Wolf | Y-096.12.116 |
| HEINE | ACMI / Olympus** | Y-096.12.117 |



| Strumento produzione | Cavo a F.O. produzione | F.O. |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|
| HEINE | Winter & Ibe Storz / Olympus* | Y-096.12.109 |
| HEINE | Richard Wolf | Y-096.12.111 |
| HEINE | ACMI / Olympus** | Y-096.12.112 |
| Winter&Ibe Storz / Olympus | HEINE | Y-096.12.113 |
| Richard Wolf | HEINE | Y-096.12.114 |

* fino al 12/2003 ** dal 01/2004

Un'azienda che ha fatto storia e ha dato il proprio nome a prodotti di qualità: HEINE.

Fondata nel 1946, di proprietà familiare, ricca di tradizioni ed oggi leader internazionale di mercato, con una completa gamma di strumenti diagnostici. I prodotti HEINE sono conformi agli standard internazionali (ISO/CE) e rappresentano il massimo della precisione e del design ergonomico. Un costante impegno nella ricerca e sviluppo è alla base di una solida e diversificata tecnologia a garanzia della qualità dei prodotti HEINE. Oltre 500 collaboratori nel mondo contribuiscono a questo successo.

www.heine.com

GERMANIA

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
82211 Herrsching
Kientalstr. 7
Tel. +49 (0) 81 52-38 0
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02
E-Mail: info@heine.com

NORD AMERICA

HEINE USA LTD.
10 Innovation Way
Dover, NH 03820
Tel. (603) 7 42-71 03
Fax (603) 7 42-72 17
Toll Free (800) 367-4872
E-Mail: service@heine-na.com

AUSTRALIA


HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road
P.O. Box 717 Brookvale 2100
New South Wales
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05
E-Mail: info@heine.com.au

SVIZZERA

HEINE (Schweiz) AG
Tobeläckerstr. 9
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: heine-schweiz@schaffhausen.ch

ITALIA

INTERMED S.R.L.
Attrezzature e Strumenti Medicali
Via della Pace 21
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39 02 98 24 80 16
Fax +39 02 98 24 73 61
E-Mail: info@intermeditalia.it

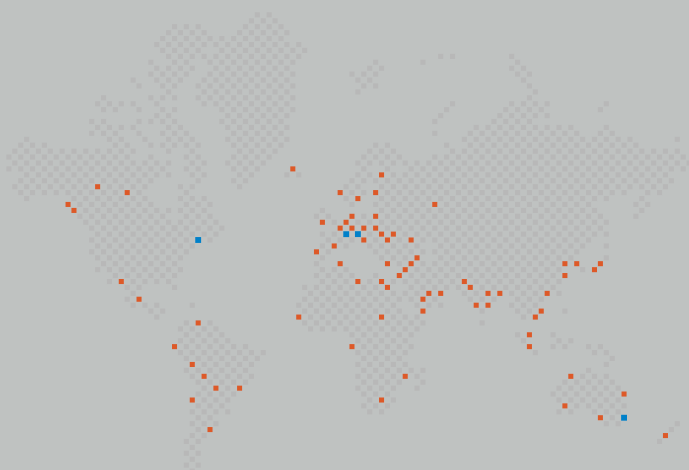

■ FILIALI HEINE
■ RAPPRESENTANTI HEINE

