

**HEINE** QUALITY  
MADE IN GERMANY

## ∴ Dermoscopio HEINE® NC2

El dermatoscopio más completo

**NEW!**

LED NOW

LED NOW IN HEINE QUALITY.



¡Un dispositivo completamente recomendable para su uso en atención primaria! Me permite realizar diagnósticos para aquellos exámenes en la piel que presentan dudas (p. ej. verrugas plantares, virutas intradérmicas/subcutáneas como astillas de madera/de vidrio o ácaros de escabiosis). Lo utilizo continuamente.

Dr. Timm Wiecken, especialista en medicina general y medicina de urgencia, Herrsching, Alemania



El nuevo HEINE NC 2 es un dermatoscopio tradicional con escala y con 10 aumentos. Al quitar fácilmente el disco de contacto, el NC 2 se convierte en un dermatoscopio sin contacto con 6 aumentos.

✓ **Imagen clara, detallada y sin defectos**

Distancia correcta y automática al objeto en el disco de contacto instalado (con 10 aumentos), escala integrada para una evaluación realista del tamaño.

✓ **Reconocimiento eficiente de una amplia zona**

con 6 aumentos sin el disco de contacto magnético.

✓ **Campo de visión especialmente grande**

La óptica de precisión HEINE de 27 mm de diámetro para imágenes muy nítidas y de alta resolución.

✓ **Reproducción cromática realista**

LED en HQ – el doble de luminosidad que el modelo anterior NC 1. Una luz totalmente homogénea, clara y de color fidedigno para un diagnóstico preciso.




✓ **Documentación fotográfica sencilla**


Fácil y rápido de utilizar con el accesorio para Apple® iPhone® a partir de la versión 5s\* y la aplicación NC2 incluso en el modo sin contacto.

✓ **Aplicación NC2**

Vigilancia y documentación rápida y sencilla. Ampliación digital de hasta 30 aumentos, resolución de hasta 12 MP.\*\* Gestión de pacientes integrada, función de correo electrónico, asignación de información de imágenes y detalles de pacientes en un mapa corporal.

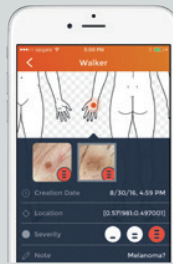

Asignación de tomas en un mapa corporal

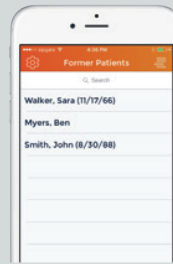

Selección de pacientes actuales

✓ **Siempre operativo**

Iluminación polarizada para el reconocimiento inmediato sin el uso de líquidos de contacto.

**Hay dos técnicas para reducir la reflexión de la piel:**

1. "Diascopia" directa con líquido de contacto (p.ej. aceite especial): se aplica un líquido entre el disco de contacto y la piel.
2. Técnica de polarización: con la ayuda de una iluminación especial polarizada, las capas superiores también pueden hacerse visibles sin líquido de contacto.



Con el disco de contacto



Sin el disco de contacto



Con funda adaptadora para iPhone

**Información de pedido:**

**Sets Dermatoscopio NC 2**

Dermatoscopio NC 2 (incl. mango USB), disco de contacto con marcaje de escala, cable USB con E4-USB fuente de alimentación de enchufe homologada para uso médico, bolso

La funda adaptadora se debe pedir por separado, ver accesorios

**D-841.78.120**

Vea arriba, pero sin disco de contacto

**D-842.78.120**

**Accessories**

Funda adaptadora para smartphone NC 2/7 para Apple iPhone 7/8	<b>D-000.78.127</b>
Funda adaptadora para smartphone NC 2/6 para Apple iPhone 6/6s	<b>D-000.78.126</b>
Funda adaptadora para smartphone NC 2/5 para Apple iPhone 5s/SE	<b>D-000.78.125</b>
Funda adaptadora NC 2/T6 para Apple iPod touch 6ta generacion	<b>D-000.78.124</b>

Debido a diferencias en las condiciones sujetas a cada país, es posible que determinados productos HEINE no estén disponibles en algunos lugares. ¡Puede encontrar otras configuraciones de producto y otros productos de calidad HEINE en nuestro sitio web [www.heine.com](http://www.heine.com)

\* Apple, el logotipo de Apple, iPhone e iPod touch son marcas de la empresa Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países.

App Store es una marca de servicio de la Apple Inc.

\*\* con iPhone a partir de la versión 6s

