



• **HEINE GAMMA® Serie**


Sfigmomanometri Latex-free e antishock
e Stetoscopi



∴ La miglior soluzione.

Chi pretende la migliore precisione diagnostica sceglie la migliore qualità.


- ∴ Antishock.
- ∴ Struttura antiurto a doppio strato.
- ∴ Manometro stabilmente ancorato a tre punti.
- ∴ Supera tutti gli standard.

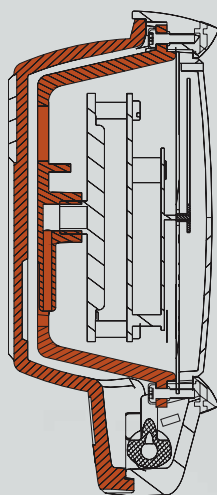

Struttura antiurto a doppio strato con manometro stabilmente ancorato a tre punti


La serie GAMMA G è stata progettata per durare a lungo. Un complesso sistema di materiali assorbenti protegge il manometro da eventuali urti e garantisce strumenti di insuperabile durata. La serie GAMMA G è stata testata in conformità alle Norme Europee (EN1060) e agli standard USA (SP9).

Testato antiurto, da un' altezza di cm.

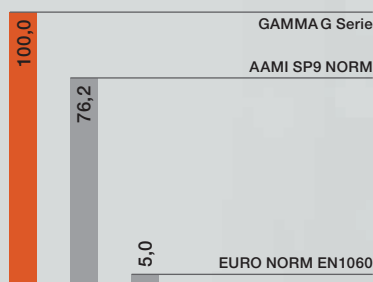

Sfigmomanometri a "Singolo Tubo" con sistema distribuzione-pressione

L'esclusivo sistema di distribuzione della pressione controlla il flusso dell'aria attraverso il manometro durante il gonfiaggio permettendo un incremento di pressione accurato e uniforme e una lunga durata del manometro stesso. Con questa innovazione la serie HEINE GAMMA G offre una straordinaria durata in un conveniente strumento a singolo tubo, caratteristica precedentemente riscontrabile solo nei sistemi a "doppio tubo".

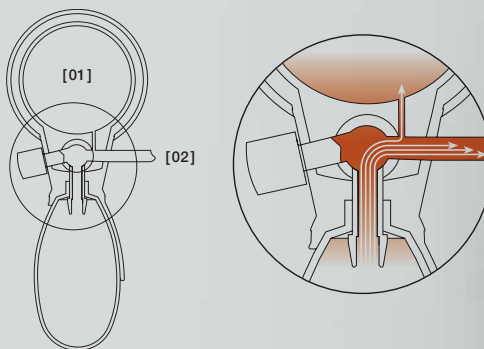

[01] MANOMETRO
[02] RACCORDO PER BRACCIALE

L'innovativa serie di sfigmomanometri Latex-free GAMMA G, introduce un standard in prestazioni, qualità e valore. Un design moderno e funzionale, in combinazione con un manometro di precisione di alta qualità ed una struttura di lunga durata, garantiscono prestazioni affidabili negli anni in qualsiasi ambito clinico.

Serie GAMMA G / Validazione clinica ufficiale.

Secondo il protocollo di validazione clinica della Società Europea dell'Ipertensione Arteriosa i misuratori di pressione HEINE GAMMA G hanno ricevuto la validazione clinica ufficiale. La pubblicazione scientifica ha confermato la precisione costante degli strumenti HEINE GAMMA G per i valori sistolici e diastolici.



[HEINE GAMMA® G5]

GAMMA G5 | ARTICOLO NR.

**Lo Sfigmomanometro
HEINE Standard.**

Le principali caratteristiche del GAMMA G5 sono la qualità e la resistenza dello chassis e del cucchiaino realizzati con una combinazione di 2 materiali termoplastici altamente resistenti agli urti. L'integrazione di un complesso sistema di materiali assorbenti protegge il manometro, assicura lunga vita e prestazioni affidabili nel tempo.

La monopalla grande permette un rapido gonfiaggio mentre l'ampio quadrante graduato e una chiara lettura dei valori anche a distanza.

- ⚡ **Latex-free.**
- ⚡ **Antiurto.**
- ⚡ **Sistema di distribuzione della pressione:** vedere illustrazione 1 sotto.
- ⚡ **Manometro protetto contro la sovrappressione:** assicura durata e affidabilità.
- ⚡ **Micro-filtro:** protegge valvola e manometro.

- ⚡ **Grande quadrante graduato:** diametro 56 mm, per una chiara lettura dei valori.
- ⚡ **Monopalla di grandi dimensioni:** 50% maggiore in volume per un gonfiaggio rapido del bracciale.
- ⚡ **Esclusiva valvola rilascio aria di precisione:** consente un fine ed esatto controllo del rilascio aria, rapido sgonfiaggio, lunga durata. Un fermo in gomma previene il blocco della valvola.
- ⚡ **Chassis** in plastica antiurto con l'aggiunta di un rivestimento antishock e antiscivolo.
- ⚡ **Cucchiaino regolabile**, in materiale termoplastico (poliammide). Per utilizzatori mancini e destrorsi.
- ⚡ **Bracciale calibrato di alta qualità, singolo tubo con chiusura a velcro.** Lavabile.
- ⚡ **Garanzia 5 anni*.**

*per difetti inerenti design, materiali e lavorazione per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto

CON UN BRACCIALE PER ADULTI	M-000.09.230
CON UN BRACCIALE PER BAMBINI	M-000.09.231
KIT FAMILY, CON BRACCIALE BAMBINI, ADULTI ED ADULTI PICCOLI	M-000.09.555
CON UN BRACCIALE PER ADULTI SENZA ASTUCCIO CON CERNIERA IN BOX DA 10 PEZZI	M-000.09.561



[HEINE GAMMA® G7]

GAMMA G7 | ARTICOLO NR.

**Il modello top in lega di alluminio
con valvola a rotazione.**

GAMMA G7 è unico nella sua avanzata struttura. Utilizzando lo chassis in lega di alluminio e materiale termoplastico avanzato, garantisce una struttura antiurto associata ad un design moderno.

Design e caratteristiche tecniche come il GAMMA G5, eccetto:

- ⚡ **Chassis superiore** realizzato in lega di alluminio, con un anello antiurto per proteggere lancetta e vetro.
- ⚡ **Chassis inferiore** in plastica antiurto con l'aggiunta di un rivestimento antishock e antiscivolo.
- ⚡ **Cucchiaino regolabile**, in lega leggera: per utilizzatori mancini e destrorsi.
- ⚡ **Garanzia 10 anni*.**

*per difetti inerenti design, materiali e lavorazione per un periodo di 10 anni dalla data di acquisto

CON UN BRACCIALE PER ADULTI	M-000.09.232
CON UN BRACCIALE PER BAMBINI	M-000.09.233
KIT FAMILY, CON BRACCIALE BAMBINI, ADULTI ED ADULTI PICCOLI	M-000.09.554
CON UN BRACCIALE PER ADULTI SENZA ASTUCCIO CON CERNIERA IN BOX DA 10 PEZZI	M-000.09.560



[HEINE GAMMA® GP]

Lo sfigmomanometro HEINE Standard ma con valvola a pulsante.

Lo sfigmo GAMMA GP è dotato di un'innovativa valvola a pulsante per la precisa selezione della velocità di rilascio dell'aria, facile da usare sia da persone mancine che destrorse. Lo sfigmo GAMMA GP ha le stesse caratteristiche del GAMMA G5.

- ❖ **Innovativa valvola a pulsante.**
Facile regolazione, gonfiaggio ultrarapido, praticamente esente da usura. Cucchiaino regolabile per utilizzatori mancini e destrorsi.
- ❖ **Garanzia 5 anni*.**

*per difetti inerenti design, materiali e lavorazione per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto

GAMMA GP	ARTICOLO NR.
CON UN BRACCIALE PER ADULTI	M-000.09.242
CON UN BRACCIALE PER BAMBINI	M-000.09.243
KIT FAMILY, CON BRACCIALE BAMBINI, ADULTI ED ADULTI PICCOLI	M-000.09.556
CON UN BRACCIALE PER ADULTI SENZA ASTUCCIO CON CERNIERA IN BOX DA 10 PEZZI	M-000.09.562



[HEINE GAMMA® XXL LF]

Il versatile modello professionale.

Il classico sfigmomanometro GAMMA XXL LF è adesso anche in versione Latex-free (LF), conservando sempre le diverse opzioni di applicazione che lo rendono ideale in ogni ambito clinico.

Il grande quadrante orientabile, è facile da leggere anche a distanza.

Poiché GAMMA XXL LF è privo di mercurio, è sicuro ed ecologico.

- ❖ **Latex-free.**
- ❖ **Struttura resistente in policarbonato**, ideale in ospedali e studi medici.
- ❖ **Grande quadrante**, diametro 130mm, può essere orientato per chiare e facili letture da ogni angolo di osservazione.

- ❖ **Lungo tubo** a spirale di 3m, per un ampio raggio di lavoro.
- ❖ **Lancetta di alta qualità** calibrata e precisa, di lunga durata.
- ❖ **Valvola di rilascio aria di precisione.**
- ❖ **Opzioni montaggio:** parete, tavolo, binario e stativo a rotelle (altezza regolabile).
- ❖ **Privo di mercurio.** Ecologico.
- ❖ **Garanzia 10 anni*.**

*per difetti inerenti design, materiali e lavorazione per un periodo di 10 anni dalla data di acquisto

GAMMA XXL LF	ARTICOLO NR.
--------------	--------------

MODELLO DA PARETE LF-W	M-000.09.323
MODELLO SU STATIVO LF-S	M-000.09.326
MODELLO DA BINARIO LF-R	M-000.09.325
MODELLO DA TAVOLO LF-T (SENZA TUBO SPIRALE)	M-000.09.322

[XXL LF-S]



[XXL LF-T]



[XXL LF-R]



[XXL LF-W]

[BRACCIALI / ACCESSORI]

Bracciali calibrati singolo tubo per GAMMA G7 / G5 / GP	Bambino piccolo	6 x 28	M-000.09.700
	Bambino	10 x 34	M-000.09.702
	Adulto piccolo	14 x 53	M-000.09.704
	Adulto	14 x 58	M-000.09.619
	Adulto grande	17 x 70	M-000.09.706
	Coscia	20 x 86	M-000.09.615
	Bracciali calibrati per GAMMA XXL LF	Bambino piccolo	6 x 28
Bambino		10 x 34	M-000.09.703
Adulto piccolo		14 x 53	M-000.09.705
Adulto		14 x 58	M-000.09.629
Adulto grande		17 x 70	M-000.09.631
Coscia		20 x 86	M-000.09.625
Accessori per montaggio e parti per GAMMA XXL LF		Porta bracciale	per modello da tavolo GAMMA XXL LF-T
	Supporto da tavolo	per modello da tavolo GAMMA XXL LF-T	M-000.09.142
	Sistema universale di montaggio	per binario, parete e stativo a rotelle GAMMA XXL LF-R / LF-W / LF-S	M-000.09.306
	Morsetto per binario	per GAMMA XXL LF-R	M-000.09.307
	Stativo a rotelle ad altezza regolabile	per GAMMA XXL LF-S	M-000.09.145



STETOSCOPI HEINE GAMMA®

- ✦ **La robusta testina** e l'elevata superficie di appoggio escludono i rumori provocati dalle dita e producono un'eccezionale risonanza. Con cromatura opaca, igienico.
- ✦ **Testina con anello di protezione contro la sensazione di freddo per il paziente.**
- ✦ **Archetto ergonomico cromato.** Regolabile singolarmente.
- ✦ **Tubo a "Y" di altissima qualità** per un'acustica ed una trasmissione del suono ottimali. Lunghezza: 56 cm.
- ✦ **Materiali privi di lattice.**

[HEINE GAMMA® 3.1 Pulse Stethoscope]

GAMMA 3.1 | ARTICOLO NR.

M-000.09.941

Per una buona riproduzione del suono.

- ✦ **Stetoscopio con robusta testina piatta.** La testina viene inserita sotto il bracciale dello sfigmomanometro in modo comodo e semplice.
- ✦ **Membrana di qualità,** con diametro di 44 mm.

- ✦ **Sistema ad un tubo** con straordinaria trasmissione del suono.
- ✦ **Comprensivo di olive** (grandi/morbide) insonorizzate.
- ✦ **Optional:** Olive, piccole/rigide (M-000.09.946).



[HEINE GAMMA® 3.2 Acoustic Stethoscope]

GAMMA 3.2 | ARTICOLO NR.

M-000.09.942

Per un'eccellente acustica.

Stesse caratteristiche del tipo GAMMA 3.1, ma con doppia testina.

- ✦ **Testina doppia combinata** con due diversi campi di frequenza, una membrana di qualità su un lato ed una campana con camera acustica conica sull'altro. Funzione

commutabile da membrana a campana.

- ✦ **Membrana di qualità,** con diametro di 44 mm, per un'acustica eccellente con trasmissione del suono ottimale.
- ✦ **Dimensioni della campana:** diametro di 30 mm.



[HEINE GAMMA® 3.3 Acoustic Stethoscope]

GAMMA 3.3 | ARTICOLO NR.

M-000.09.943

Per l'utilizzo in ambito pediatrico.

Stesse caratteristiche del GAMMA 3.2.

- ✦ **Grazie alla ridotta superficie di appoggio** del diametro di 31 mm GAMMA 3.3 è l'ideale per l'auscultazione pediatrica.



[HEINE GAMMA® C3 Cardio Stethoscope]

GAMMA C3 | ARTICOLO NR.


M-000.09.944

Ideale per l'utilizzo in ambito cardiologico.

- ✦ **Eccellenti performance acustiche** specialmente nei campi di frequenza importanti per l'auscultazione dei battiti cardiaci.
- ✦ **Testina doppia combinata** con due diversi campi di frequenza, una membrana doppia combinata su un lato e una campana conica sull'altro. Funzione commutabile da membrana a campana.

- ✦ **Membrana doppia con elevata performance combinata,** del diametro di 45 mm. Garantisce un'acustica di eccellente qualità e si adatta in maniera perfetta alla pelle per una trasmissione del suono ultrasensibile.
- ✦ **Sistema due tubi in uno** per le più elevate esigenze. Altamente flessibile e anti deformazione, con straordinaria trasmissione del suono.
- ✦ **Olive incluse** (grandi/morbide) e un paio di olive di ricambio (piccole/rigide) per l'insonorizzazione.



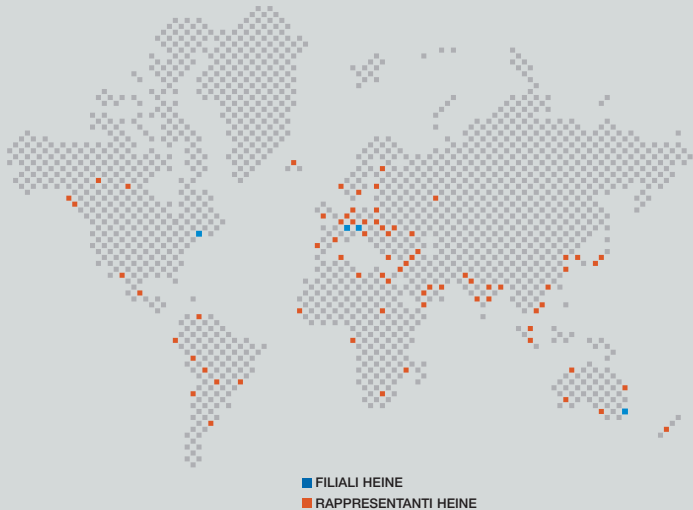

Un'azienda che ha fatto storia e ha dato il proprio nome a prodotti di qualità: HEINE.

Fondata nel 1946, di proprietà familiare, ricca di tradizioni ed oggi leader internazionale di mercato, con una completa gamma di strumenti diagnostici. I prodotti HEINE sono conformi ai più alti standard richiesti nelle specifiche norme internazionali di riferimento (ISO/IEC) e rappresentano il massimo della precisione e del design ergonomico. Un costante impegno nella ricerca e sviluppo è alla base di una solida e diversificata tecnologia a garanzia della qualità dei prodotti HEINE. Oltre 500 collaboratori nel mondo contribuiscono a questo successo.

www.heine.com



GERMANIA

 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7
82211 Herrsching
Tel. +49 (0) 81 52-38 0
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02
E-Mail: info@heine.com
www.heine.com

NORD AMERICA

HEINE USA LTD.
10 Innovation Way
Dover, NH 03820
Tel. (603) 7 42-71 03
Fax (603) 7 42-72 17
Toll Free (800) 367-4872
E-Mail: service@heine-na.com

AUSTRALIA

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road
PO Box 7218 Warringah Mall
NSW 2100
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05
E-Mail: info@heine.com.au

SVIZZERA

HEINE (Schweiz) AG
Tobeläckerstr. 9
CH-8212 Neuhausen am Rheinfl
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: info@heineschweiz.ch

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
© 2016 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG. Tutti i diritti riservati.

Distributore Autorizzato

04/16. A-000.00.215 i

