

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

↳ Laringoscopi HEINE

Lo standard in
performance e affidabilità



LED HQ

LED NOW IN HEINE QUALITY.



HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY



La performance e l'affidabilità del vostro laringoscopio sono fondamentali per un'intubazione di successo

Per oltre 30 anni abbiamo raffinato i nostri Laringoscopi a Fibra Ottica per fornire un'ottima illuminazione per una visione chiarissima, per una performance e un'affidabilità impareggiabili.

Siamo orgogliosi di non essere mai scesi a compromessi per cercare di fornire i migliori prodotti possibili, rispettando rigidi standard di design conservando la passione per un lavoro artigianale di precisione, perfezionato in anni di

ideali familiari e di best practice. La concretizzazione di questo impegno oggi è rappresentata dal nostro Sistema Laringoscopico Classic+, che supera qualsiasi altro prodotto sul mercato.

Il nostro Sistema Classic+ si attiene ad uno standard di performance e affidabilità che nessun'altra azienda può eguagliare. Si tratta di uno standard visibile nella sua costruzione, nelle sue funzioni e garanzie.

Fibre ottiche impareggiabili

Fino a 6.500 fili di fibra ottica per una trasmissione della luce e una longevità di livello superiore

Acciaio di altissima qualità

Acciaio inossidabile di grado 304 per servirvi al meglio durante tutta la vita del prodotto



Visione chiarissima

Più luce dove serve, grazie al design con fascio in fibra ottica integrato



LED in HQ

3 volte più luminosa dell'alogena convenzionale, nessuna sostituzione della lampadina e rendering del colore autentico



Manici di diverse misure

(Standard, SLIM e SHORT)

Design in 2 pezzi

La guaina esterna può essere sterilizzata separatamente per la sicurezza del paziente, il componente di illuminazione interno è protetto per garantire un funzionamento affidabile

Sono disponibili versioni con batteria a secco (alcalina) e ricaricabile

Qui potete vedere come sono prodotti i laringoscopi HEINE:



Performance affidabile tra le difficili operazioni quotidiane di pulizia e sterilizzazione

Il vero test che deve superare un sistema laringoscopico è quello di affrontare le difficoltà di una pulizia e una sterilizzazione ripetute, pur mantenendo una performance affidabile per garantire un'intubazione perfetta.

I Laringoscopi e i Manici HEINE Classic+ sono progettati e prodotti in modo specifico per resistere a quasi tutti i metodi di pulizia e sterilizzazione mantenendo una performance costante. Ogni volta. Garantito.

Varietà di metodi di sterilizzazione

Tutte le lame e le guaine esterne possono essere pulite e sterilizzate in modi diversi, compresi l'autoclave a vapore, sistemi con sterilizzante a freddo e con gas plasma.

Illuminazione garantita

I Laringoscopi a Fibra Ottica Classic+ di HEINE sono costruiti per resistere a oltre 4.000 cicli in autoclave senza degrado della trasmissione della luce al di sotto di 1.000 lux.



I laringoscopi più affidabili e performanti del mondo sono più accessibili di quanto pensiate

Un investimento intelligente


Le Lame Classic+ HEINE superano qualsiasi altro sistema. Il nostro Sistema Classic+ non ha praticamente costi operativi e rappresenta attualmente un investimento in generale inferiore rispetto a prodotti simili "meno cari" (vedere la tabella sotto). Questo è il motivo per cui migliaia di istituti di alto livello in tutto il mondo utilizzano i Laringoscopi Classic+ HEINE nelle loro strutture.

Anni di servizio affidabile

Un investimento iniziale nella performance e nell'affidabilità dei Laringoscopi Classic+ HEINE ripagherà nei primi anni di utilizzo, ma il vero valore va ben oltre. Oggi, presso molti istituti, i nostri Laringoscopi Classic+ funzionano ancora in modo affidabile anche dopo 20 anni di uso quotidiano.

Gli alti costi della bassa qualità

Gli altri sistemi possono incorrere in costi anche superiori al 30% nel corso di 5 anni di impiego, a causa dell'elevata percentuale di guasti e dei successivi costi di sostituzione dei laringoscopi a causa dei ripetuti processi di sterilizzazione. I Laringoscopi Classic+ di HEINE sono forniti con la nostra garanzia di illuminazione anche dopo ripetuti cicli in autoclave e solitamente non incorrono in costi di sostituzione a causa di guasti considerando il medesimo intervallo di tempo.

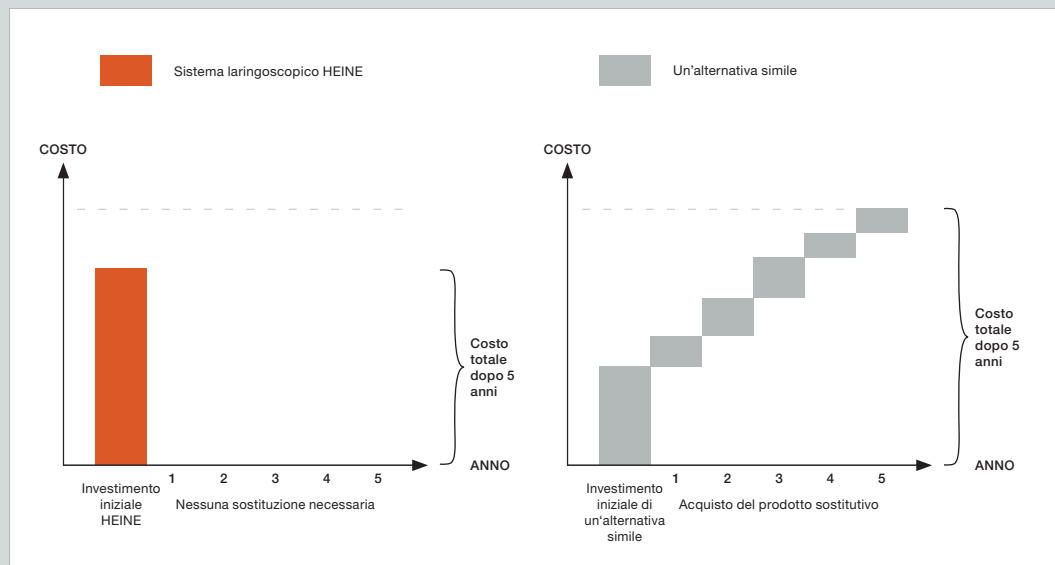

Il modello di costo si basa su valori medi ricavati da analisi dei costi complete per un campione rappresentativo di istituti che successivamente sono passati ai Laringoscopi e ai Manici HEINE. L'esempio si basa su questi valori se si applicano all'acquisto di 200 lame dove le Lame HEINE hanno un costo doppio rispetto all'alternativa simile e i casi di guasto medi stimati dei laringoscopi alternativi sono i seguenti; 20% (della quantità iniziale) nel 1° anno, 40% (della quantità rimanente) nel 2° anno, 60% (della quantità rimanente) nel 3° anno, 90% (della quantità rimanente) nel 4° anno e 100% dopo 5 anni.

Contattate il vostro distributore autorizzato

Contattate HEINE o un il vostro distributore HEINE locale autorizzato oggi stesso per vedere la differenza di performance e affidabilità che può fare un Sistema Classic+ HEINE. Possiamo anche preparare una semplice analisi dei costi che evidenzierà rapidamente la convenienza di un investimento in un Sistema Laringoscopico Classic+ HEINE per la vostra struttura.



LAME PER LARINGOSCOPI CLASSIC+ HEINE



Classic+ Macintosh



Classic+ Miller



Classic+ WIS



Classic+ Paed

DIMENSIONI LAMA	LUNGHEZZA COMPLESSIVA	LARGHEZZA DISTALE	N. ART
Mac 0	82 mm	9 mm	F-000.22.100
Mac 1	93 mm	11 mm	F-000.22.101
Mac 2	115 mm	13 mm	F-000.22.102
Mac 3m (curva più forte)	135 mm	15 mm	F-000.22.143
Mac 3	135 mm	15 mm	F-000.22.103
Mac 4	155 mm	15 mm	F-000.22.104
Mac 5	176 mm	15 mm	F-000.22.105
Miller 00	76 mm	9,5 mm	F-000.22.119
Miller 0	80 mm	10,5 mm	F-000.22.120
Miller 1	100 mm	11,5 mm	F-000.22.121
Miller 2	152 mm	13 mm	F-000.22.122
Miller 3	192 mm	13 mm	F-000.22.123
Miller 4	207 mm	15,9 mm	F-000.22.124
WIS 1	110 mm	13 mm	F-000.22.131
WIS 2	130 mm	16 mm	F-000.22.132
WIS 3	160 mm	16 mm	F-000.22.133
Paed 0	82 mm	12 mm	F-000.22.110
Paed 1	95 mm	13 mm	F-000.22.111

MANICI LARINGOSCOPIO HEINE CON LED^{HQ} O ILLUMINAZIONE XHL

· **LED in HQ:** Il nuovo standard per l'illuminazione a LED, definisce l'intensità della luce, l'omogeneità e la resa dei colori ottimali per una visualizzazione più precisa. Il rosso è rosso, blu è blu. Temperatura colore di riferimento: 5.000K. Durata utile del LED fino a 100.000 ore.



· **Tecnologia alogena all'avanguardia XHL® Xenon:** le lampadine HEINE durano fino al 50% in più rispetto alle lampadine convenzionali, garantendo una lunga durata, una performance ottimale e convenienza in termini di costi.

· **Fonti di alimentazione:**

versione con batteria a secco o versione con batteria ricaricabile (Li-ion / caricatore da tavolo NT4).

LED ^{HQ}	Versione a batteria	Versione ricaricabile Li-ion
Manico a batteria Standard F.O. LED per 2 batterie alcaline di formato C [01]	F-008.22.860	
Manico ricaricabile Standard F.O. 4 LED NT		F-008.22.894
Manico a batteria F.O. SLIM LED per 2 batterie alcaline di formato AA [02]	F-008.22.800	
Manico ricaricabile F.O. 4 SLIM LED NT		F-008.22.804
Manico a batteria F.O. SHORT LED per 2 batterie alcaline di formato AA [03]	F-008.22.812	
Manico ricaricabile F.O. 4 SHORT LED NT		F-008.22.424

XHL	Versione a batteria	Versione ricaricabile Li-ion
Manico a batteria Standard F.O. per 2 batterie alcaline di formato C [01]	F-001.22.860	
Manico ricaricabile Standard F.O. 4 NT		F-007.22.894
Manico a batteria F.O. SLIM per 2 batterie alcaline di formato AA [02]	F-001.22.800	
Manico ricaricabile F.O. 4 SLIM NT		F-007.22.804
Manico a batteria F.O. SHORT per 2 batterie alcaline di formato AA [03]	F-001.22.812	
Manico ricaricabile F.O. 4 SHORT NT		F-007.22.424

N. Art.	Nome
X-002.99.494	Caricatore da tavolo NT4 senza manico, con adattatori per inserto del laringoscopia Standard F.O. 4 NT, Manici Laringoscopia F.O. 4 SHORT NT
X-000.99.086	Set di due riduttori per Manico Laringoscopia F.O. 4 SLIM NT




Per maggiori informazioni sui componenti del manico o su pezzi di ricambio come batterie, lampadine di ricambio o basi chiusura e altre opzioni manico, vi invitiamo a consultare il nostro Catalogo Generale 2016, a visitare www.heine.com o a contattare il nostro partner di distribuzione.



Un'azienda che ha fatto storia e ha dato il proprio nome a prodotti di qualità: HEINE.

Fondata nel 1946, di proprietà familiare, ricca di tradizioni ed oggi leader internazionale di mercato, con una completa gamma di strumenti diagnostici. I prodotti HEINE sono conformi ai più alti standard richiesti nelle specifiche norme internazionali di riferimento (ISO/IEC) e rappresentano il massimo della precisione e del design ergonomico. Un costante impegno nella ricerca e sviluppo è alla base di una solida e diversificata tecnologia a garanzia della qualità dei prodotti HEINE. Oltre 500 collaboratori nel mondo contribuiscono a questo successo.

www.heine.com

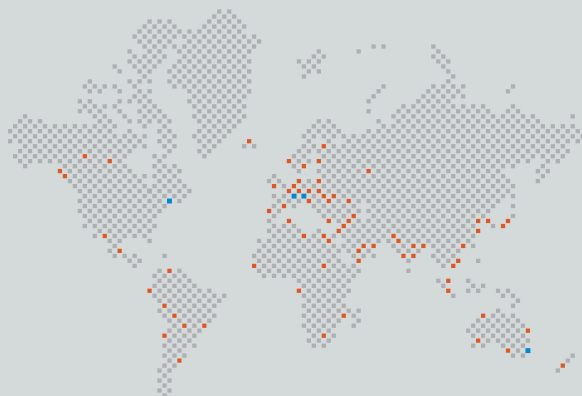

■ FILIALI HEINE
■ RAPPRESENTANTI HEINE

GERMANIA

 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7
82211 Herrsching
Tel. +49 (0) 81 52-38 0
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02
E-Mail: info@heine.com
www.heine.com

NORD AMERICA

HEINE USA LTD.
10 Innovation Way
Dover, NH 03820
Tel. (603) 7 42-71 03
Fax (603) 7 42-72 17
Toll Free (800) 367-4872
E-Mail: service@heine-na.com

AUSTRALIA

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road
PO Box 7218 Warringah Mall
NSW 2100
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05
E-Mail: info@heine.com.au

SVIZZERA

HEINE (Schweiz) AG
Tobeläckerstr. 9
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: info@heineschweiz.ch

Distributore Autorizzato

03/16. A-000.00.225

