

## ∴ Funduscopio HEINE® iC 2

Se il paziente non può andare dallo strumento,  
lo strumento va dal paziente.



LED HO

LED NOW IN HEINE QUALITY.



Oftalmoscopio digitale portatile per bambini e pazienti costretti a letto. E per tutti gli altri.



✓ **Ovunque al vostro fianco.**

Con solo 300g di peso, estrema facilità di utilizzo e il funzionamento senza fili, è l'ideale per l'esame di bambini, pazienti costretti a letto, feriti o disabili.

✓ **Comodo per medico e paziente.**

Adeguate distanza di lavoro per medico e paziente e regolazione dell'illuminazione LED gradevole al paziente. Ovviamente nel rispetto dei massimi standard internazionali per la sicurezza fotobiologica

✓ **Correzione diottrica continua.**

Regolabile da +15 a -15 diottrie, oltre all'autofocus con +/-3 diottrie.

**NOVITÀ!**

✓ **Ripongo e Ricarico: tutto in uno.**

La nuova stazione di carica iC2 è la prima stazione di carica in dotto al mondo ad aver ricevuto l'omologazione per un prodotto medico. Addio cavo di carica!

✓ **Immagini del fondo di qualità:**

sistema ottico di precisione con 4 lenti asferiche ad alte prestazioni. Semplice accesso alla documentazione degli esami precedenti. Eccellente qualità di acquisizione fino a 12 MP\*\*.

✓ **Campo visivo fino a 34°.**

L'angolo di visuale è così di circa 4 volte più grande rispetto a quello dei normali oftalmoscopi diretti di 9°.

✓ **Semplice osservazione della periferia.**

Semplicemente inclinando in alto e in basso l'iC2.

✓ **Scoprite l'intelligenza dell'app iC2.**

L'app è in grado di fare diverse cose: localizzazione intuitiva di immagini, ingrandimento continuo, salvataggio di dati supplementari del paziente, documentazione dello stato effettivo e, soprattutto: invio via e-mail delle fotografie.




Download on the App Store

✓ **Un video vale più di 1.000 parole.**

Un breve video vi illustra quanto sia facile fotografare il fondo oculare. Inquadrate questo codice QR o andate alla pagina [heine.com/video/heine\\_ic2\\_en\\_gb/](http://heine.com/video/heine_ic2_en_gb/)



**Esempi di immagini del fundus acquisite con il Funduscopio HEINE iC2**

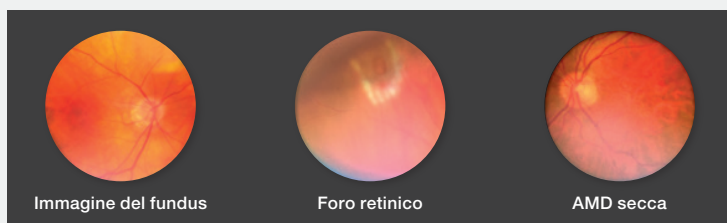

Immagini ad alta risoluzione

Selezione dei pazienti esistenti

**Informazioni per l'ordinazione:**

**iC2 Charger Set/7 per iPhone 7 e 8**

iC2 con adattatore per smartphone iC2/7 per Apple® iPhone® 7 e 8\*, iC2 Charger, cavo USB con E4-USB alimentatore approvato per uso medico e borsa **C-152.40.211**

**iC2 Charger Set/6 per iPhone 6/6s**

Come sopra ma con adattatore per smartphone iC2/6 per Apple iPhone 6/6s\* **C-151.40.211**

**iC2 Charger Set/5 per iPhone 5s e SE**

Come sopra ma con adattatore per smartphone iC2/5 per Apple iPhone 5s e SE\* **C-150.40.211**



➤ A causa delle normative locali, non tutti i prodotti HEINE potrebbero essere disponibili nel vostro paese. Potete trovare ulteriori configurazioni del prodotto ed altri prodotti di qualità HEINE su [heine.com](http://heine.com)

\* Apple iPhone non incluso nella fornitura. Apple, il logo Apple e iPhone sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un servizio registrato di Apple Inc.

\*\* Con iPhone a partire dalla versione 6s

