


**Votre  
POULS  
ne va pas  
tarder  
à monter,  
de pur  
BONHEUR.**





## SHOCKPROOF

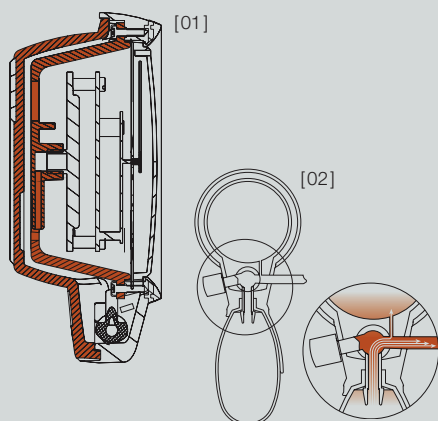

## SHOCKPROOF

**[01] Construction du boîtier à double paroi, montage antichoc du manomètre.**

Les tensiomètres de la série GAMMA G sont construits solidement, avec un système d'absorption des chocs très élaboré qui protège le manomètre et assure aux instruments une longévité inégalée. La norme européenne EN ISO 81060-1 ainsi que la norme ANSI/AAMI/ISO 81060-1 sont respectées.

## SYSTÈME DE RÉPARTITION DE PRESSION

**[02] Conception monotube avec système de répartition de pression.**

Le système exclusif de répartition de pression contrôle l'arrivée d'air au manomètre pendant le gonflage, pour donner une montée en pression douce et précise qui augmente la longévité du manomètre. Grâce à cette innovation, la Série HEINE GAMMA G offre maintenant une caractéristique de longévité, réservée jusqu'alors aux seuls systèmes « double tube », sous une forme monotube pratique.



VALIDATION DES TENSIOMÈTRES GAMMA G

## HEINE GAMMA® G7

## Le fleuron de la gamme en alliage d'aluminium



- ✦ Antichoc.
- ✦ Sans latex.
- ✦ Système de régulation de pression.
- ✦ Manomètre protégé des surpressions. Longévité et fiabilité.
- ✦ Microfiltre protège la valve et le manomètre.
- ✦ Cadran grand diamètre. Facile à lire noir sur blanc 56mm Ø.
- ✦ Aiguille de grande qualité. Calibrage précis, résistante et antichoc.
- ✦ Grande poire de gonflage. 50 % de volume en plus pour le gonflage rapide du brassard.
- ✦ Valve d'échappement d'air exclusive. Permet un réglage précis et fiable de l'échappement, décompression rapide, grande longévité. Une butée en caoutchouc évite le blocage de la valve.
- ✦ Dessus du boîtier en alliage d'aluminium avec une bague absorbant les chocs pour protéger l'aiguille et le verre.
- ✦ Dessous du boîtier en plastique résistant avec un revêtement antidérapant absorbant les chocs.
- ✦ Cuillère réglable en alliage léger. Pour utilisation de la main droite ou de la main gauche.
- ✦ Brassard monotube de grande qualité, avec fermeture Velcro. Lavable.
- ✦ Design ergonomique. Le G7 est le compromis parfait entre le confort et la facilité d'utilisation.
- ✦ 10 ans de garantie.\*

\* contre les défauts de matériau, de fabrication et de conception pendant une période de 10 ans à partir de la date d'achat.

## GAMMA G7

|                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| complet avec brassard adulte dans un étui à fermeture éclair                               | M-000.09.232 |
| complet avec brassard enfant dans un étui à fermeture éclair                               | M-000.09.233 |
| Kit pratique avec brassards enfant, adulte et petit adulte dans un étui à fermeture éclair | M-000.09.554 |
| complet avec brassard adulte sans étui à fermeture éclair, emballage de 10 pièces          | M-000.09.560 |

## HEINE GAMMA® G5

## Le tensiomètre HEINE standard



Mêmes caractéristiques que GAMMA G7, sauf :

- ✶ **Boîtier en plastique résistant** avec un revêtement antidérapant absorbant les chocs.
- ✶ **Cuillère réglable (thermoplastique).** Pour utilisation de la main droite ou de la main gauche.
- ✶ **5 ans de garantie.\***

\* contre les défauts de matériau, de fabrication et de conception pendant une période de 5 ans à partir de la date d'achat.

| GAMMA G5                                                                                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| complet avec brassard adulte dans un étui à fermeture éclair                               | M-000.09.230 |
| complet avec brassard enfant dans un étui à fermeture éclair                               | M-000.09.231 |
| Kit pratique avec brassards enfant, adulte et petit adulte dans un étui à fermeture éclair | M-000.09.555 |
| complet avec brassard adulte sans étui à fermeture éclair, emballage de 10 pièces          | M-000.09.561 |

## HEINE GAMMA® GP

## Modèle avec valve bouton pression innovante



Mêmes caractéristiques techniques que GAMMA G5 mis à part la valve bouton pression.

- ✶ **Le système exclusif de distribution de pression** confère une montée en pression douce et sûre, et assure une grande longévité au manomètre. Facile à utiliser indifféremment par les droitiers ou les gauchers.
- ✶ **5 ans de garantie.\***

\* contre les défauts de matériau, de fabrication et de conception pendant une période de 5 ans à partir de la date d'achat.

| GAMMA GP                                                                                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| complet avec brassard adulte dans un étui à fermeture éclair                               | M-000.09.242 |
| complet avec brassard enfant dans un étui à fermeture éclair                               | M-000.09.243 |
| Kit pratique avec brassards enfant, adulte et petit adulte dans un étui à fermeture éclair | M-000.09.556 |
| complet avec brassard adulte sans étui à fermeture éclair, emballage de 10 pièces          | M-000.09.562 |

## HEINE GAMMA® XXL LF

## Le modèle professionnel polyvalent



[01]

Comme le GAMMA XXL LF ne contient pas de mercure, il est à la fois sans risque et écologique.

- ✶ **Sans latex.**
- ✶ **Construction robuste en polycarbonate.** Pour résister aux sollicitations les plus exigeantes en cabinet ou à l'hôpital.
- ✶ **Cadran de grande dimension (Ø 130 mm).** Orientable pour une lecture facile, sous n'importe quel angle.
- ✶ **Aiguille précise de haute qualité.** Pour une indication exacte, stable et juste.
- ✶ **Valve de précision en métal.** Facile à doser.
- ✶ **Tube de gonflage spiralé (3 m) donnant une plus grande distance de travail.**
- ✶ **Sans mercure.**
- ✶ **Valve d'échappement d'air de précision.**
- ✶ **Fixations :** Murale, sur table, sur rail ou sur pied à roulettes (réglable en hauteur).
- ✶ **10 ans de garantie.\***


\* contre les défauts de matériau, de fabrication et de conception pendant une période de 10 ans à partir de la date d'achat.

## GAMMA XXL LF

|                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| GAMMA XXL LF-W Modèle mural complet avec brassard adulte [01]                       | M-000.09.323 |
| GAMMA XXL LF-S Modèle sur pied à roulettes complet avec brassard adulte [02]        | M-000.09.326 |
| GAMMA XXL LF-R Modèle sur rail complet avec brassard adulte [03]                    | M-000.09.325 |
| GAMMA XXL LF-T Modèle de table (tube non-spiralé) complet avec brassard adulte [04] | M-000.09.322 |
| GAMMA XXL LF-WB pour Wallboard, voir page 130 [05]                                  | M-000.09.327 |

## Accessoires

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Support brassard pour GAMMA XXL LF-T                                   | M-000.09.141 |
| Support de table pour GAMMA XXL LF-T                                   | M-000.09.142 |
| Pied à roulettes réglable pour GAMMA XXL LF-S (80 – 125 cm de hauteur) | M-000.09.145 |
| Plaque de montage universelle pour GAMMA XXL LF-R, -S, -W              | M-000.09.306 |
| Pince de rail pour GAMMA XXL LF-R                                      | M-000.09.307 |

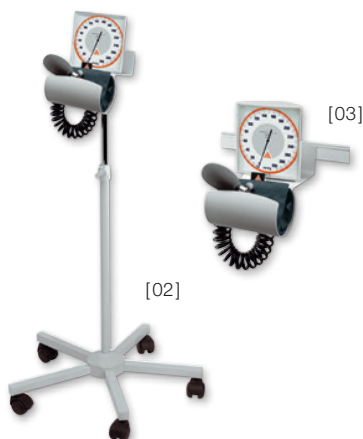

[02]



[03]



[04]



[05]

## Brassards de tensiomètres et accessoires

## Brassards de tensiomètres sans latex



Brassards pour tensiomètres GAMMA G7 / G5 / GP / XXL LF.


- ✧ Sans latex.
- ✧ S'adaptent à la plupart des tensiomètres les plus couramment utilisés.
- ✧ Brassards velcro de grande qualité, réalisés dans une matière résistante à l'usure, physiologiquement testée.
- ✧ Double couture.
- ✧ Lavable.
- ✧ Index de bon positionnement.
- ✧ Indication claire de la taille et de la circonférence du bras.
- ✧ Tube très épais, hautement flexible pour une grande longévité.
- ✧ Fiabilité prouvée, système absolument étanche.

|  | GAMMA<br>G7 / G5 / GP | Brassards monotube, complet |                    |              | Poches monotube |              | Enveloppes |              |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|
|  |                       | Taille                      | Circonférence / cm |              | Taille          |              | Taille     |              |
|  | Bébé [01]             | 6x28                        | 8–13               | M-000.09.700 | 5x9             | M-000.09.661 | 6x28       | M-000.09.059 |
|  | Enfant [02]           | 10x34                       | 13–20              | M-000.09.702 | 7x14            | M-000.09.663 | 10x34      | M-000.09.060 |
|  | Petit, adulte [03]    | 14x53                       | 20–29              | M-000.09.704 | 11x23           | M-000.09.664 | 14x53      | M-000.09.061 |
|  | Adulte [04]           | 14x58                       | 29–41              | M-000.09.619 | 12x28           | M-000.09.665 | 14x58      | M-000.09.055 |
|  | Grande, adulte [05]   | 17x70                       | 35–47              | M-000.09.706 | 15x34           | M-000.09.668 | 17x70      | M-000.09.058 |
|  | Cuisse [06]           | 20x86                       | 41–59              | M-000.09.615 | 18x41           | M-000.09.667 | 20x86      | M-000.09.057 |

|  | GAMMA<br>XXL LF     | Brassards 2 tubes, complet |                    |              | Poches 2 tubes |              | Enveloppes |              |
|--|---------------------|----------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|
|  |                     | Taille                     | Circonférence / cm |              | Taille         |              | Taille     |              |
|  | Bébé [01]           | 6x28                       | 8–13               | M-000.09.701 | 5x9            | M-000.09.671 | 6x28       | M-000.09.059 |
|  | Enfant [02]         | 10x34                      | 13–20              | M-000.09.703 | 7x14           | M-000.09.673 | 10x34      | M-000.09.060 |
|  | Petit, adulte [03]  | 14x53                      | 20–29              | M-000.09.705 | 11x23          | M-000.09.674 | 14x53      | M-000.09.061 |
|  | Adulte [04]         | 14x58                      | 29–41              | M-000.09.629 | 12x28          | M-000.09.675 | 14x58      | M-000.09.055 |
|  | Grande, adulte [05] | 17x70                      | 35–47              | M-000.09.631 | 15x34          | M-000.09.678 | 17x70      | M-000.09.058 |
|  | Cuisse [06]         | 20x86                      | 41–59              | M-000.09.625 | 18x41          | M-000.09.677 | 20x86      | M-000.09.057 |

Notez que la position des raccords sur les enveloppes et les poches a changé.

Pour vos commandes de pièces de rechange, veuillez à toujours indiquer le numéro de LOT imprimé sur la manchette afin que nous puissions vous livrer des poches / enveloppes.

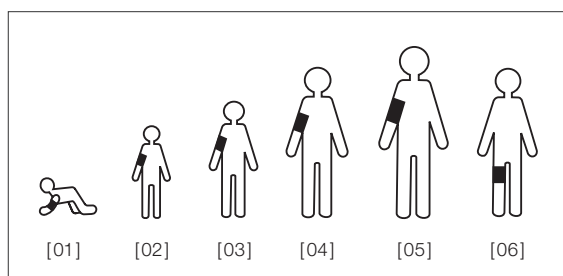

## STETHOSCOPES HEINE GAMMA®

- ✶ **Le pavillon massif** et la force d'appui élevée évitent les bruits de doigts et produisent ainsi une résonance remarquable. Acier chromé mat hygiénique.
- ✶ **Pavillon avec bague anti-froid pour le confort des patients.**
- ✶ **Lyre ergonomique en finition chromée.** Réglage individuel.
- ✶ **Tubulure en Y de très grande qualité** pour des performances acoustiques et une transmission des sons optimale. Longueur 56 cm.
- ✶ **Matériaux sans latex.**

## HEINE GAMMA® 3.1 Pulse Stethoscope

Pour une bonne restitution du son.



- ✶ **Stéthoscope à pavillon plat massif.** Le pavillon se glisse agréablement et sans efforts sous le brassard du tensiomètre.
- ✶ **Membrane de qualité, Ø 44 mm.**
- ✶ **Système de tubulure monocal** avec une remarquable conduction du son.
- ✶ **Olives incluses** (grandes/souples) pour l'élimination des sons parasites.
- ✶ **Disponible en option:** Olives, (petites/rigides) (M-000.09.946).

GAMMA 3.1

M-000.09.941

## HEINE GAMMA® 3.2 Acoustic Stethoscope

Pour une excellente acoustique.



Caractéristiques techniques identiques à GAMMA 3.1 mais avec double pavillon.

- ✶ **Pavillon combiné double** avec deux plages de fréquence différentes, une membrane de qualité d'un côté et une cloche avec ouverture conique sur la chambre acoustique de l'autre. Réversible : fonction membrane ou fonction cloche.
- ✶ **Membrane de qualité, Ø 44 mm,** pour d'excellentes performances acoustiques et une transmission optimale des sons.
- ✶ **Taille de la cloche Ø 30 mm.**

GAMMA 3.2

M-000.09.942

## HEINE GAMMA® 3.3 Acoustic Stethoscope

Pour les examens pédiatriques.



Caractéristiques techniques identiques à GAMMA 3.2.

- ✶ **Grâce au diamètre de membrane** de seulement 31 mm, le GAMMA 3.3 se prête particulièrement bien à l'examen pédiatrique.

GAMMA 3.3

M-000.09.943

## HEINE GAMMA® C3 Cardio Stethoscope

Spécialement destiné à la cardiologie.



- ✶ **Excellentes performances acoustiques** en particulier dans les plages de fréquence importantes pour l'auscultation des bruits du cœur.
- ✶ **Pavillon combiné double** avec deux plages de fréquence différentes, une double membrane double fréquence d'un côté et une cloche conique de l'autre. Réversible : fonction membrane ou fonction cloche.
- ✶ **Double membrane double fréquence de grande qualité, Ø 45 mm.** Gage d'excellentes performances acoustiques et d'une adaptation idéale sur la peau pour une transmission du son extrêmement sensible.
- ✶ **Système de tubulure bicanal** pour les exigences les plus élevées. Très élastique et anti-tortillement, avec une remarquable conduction du son.
- ✶ **Olives incluses** (grandes/souples) et une paire d'olives de rechange (petites/rigides) pour l'élimination des sons parasites.

GAMMA C3

M-000.09.944