


**Il vostro  
BATTITO  
cardiaco  
accelererà.  
Dalla  
GIOIA.**





## SHOCKPROOF

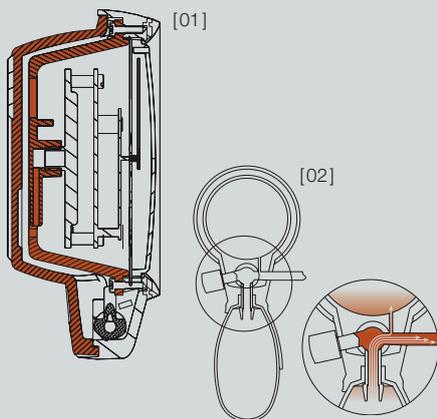

## SHOCKPROOF

**[01] La serie GAMMA G è stata progettata per durare a lungo.**

Un complesso sistema di materiali assorbenti protegge il manometro da eventuali urti e garantisce strumenti di insuperabile durata. In conformità con la norma europea EN ISO 81060-1 e con la ANSI/AAMI/ISO 81060-1.

## SISTEMA DI DISTRIBUZIONE-PRESSIONE DELL'ARIA

**[02] Sfigmomanometri a tubo singolo con un innovativo sistema di distribuzione-pressione dell'aria.**

Il design della valvola permette una pressione ideale dell'aria ed assorbe i picchi del flusso dell'aria durante il gonfiaggio, garantendo un incremento di pressione accurato e uniforme. Questi vantaggi sino ad ora erano possibili solo con i sistemi a doppio tubo.



VALIDAZIONE CLINICA E.S.H.

## HEINE GAMMA® G7

Il modello top in lega di alluminio con valvola a rotazione



- ∴ Antishock.
- ∴ Latex-free.
- ∴ Sistema di misurazione della pressione unico nel suo genere.
- ∴ Manometro protetto contro la sovrappressione. Assicura durata e affidabilità.
- ∴ Micro-filtro. Protegge valvola e manometro.
- ∴ Grande quadrante graduato. Ø 56mm, cifre nere su sfondo bianco per una chiara lettura dei valori.
- ∴ Lancetta di alta qualità. Calibrata e precisa, di lunga durata e resistente agli urti.
- ∴ Monopalla di grandi dimensioni. 50% maggiore in volume per un gonfiaggio rapido del bracciale.
- ∴ Esclusiva valvola rilascio aria di precisione. Consente un controllo del rilascio d'aria fine ed esatto, rapido sgonfiaggio e lunga durata. Un fermo in gomma previene il blocco della valvola.
- ∴ Chassis superiore realizzato in lega di alluminio, con un anello antiurto per proteggere lancetta e vetro.
- ∴ Chassis inferiore in plastica antiurto con l'aggiunta di un rivestimento antishock e antiscivolo.
- ∴ Cucchiaio regolabile, in lega leggera. Per utilizzatori mancini e destrorsi.
- ∴ Bracciale calibrato di alta qualità, singolo tubo con chiusura a velcro. Lavabile.
- ∴ Design ergonomico. G7 è perfettamente bilanciato per comfort e facilità d'uso.
- ∴ Garanzia 10 anni.\*

\* per difetti inerenti design, materiali e lavorazione per un periodo di 10 anni dalla data di acquisto.

GAMMA G7	
completo con un bracciale per adulti, in astuccio con cerniera	M-000.09.232
completo con un bracciale per bambini, in astuccio con cerniera	M-000.09.233
Kit Family, con bracciale bambini, adulti ed adulti piccoli in astuccio con cerniera	M-000.09.554
completo con un bracciale per adulti senza astuccio con cerniera in box da 10 pezzi	M-000.09.560

## HEINE GAMMA® G5

### Lo sfigmomanometro HEINE Standard



Design e caratteristiche tecniche come il GAMMA G7, eccetto:

- ∴ **Chassis da plastica antiurto** con rivestimento antishock e antiscivolo.
- ∴ **Cucchiaio regolabile, in materiale termoplastico.** Per utilizzatori mancini e destrorsi.
- ∴ **Garanzia 5 anni.\***

\* per difetti inerenti design, materiali e lavorazione per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto.

GAMMA G5	
completo con un bracciale per adulti, in astuccio con cerniera	<b>M-000.09.230</b>
completo con un bracciale per bambini, in astuccio con cerniera	<b>M-000.09.231</b>
Kit Family, con bracciale bambini, adulti ed adulti piccoli in astuccio con cerniera	<b>M-000.09.555</b>
completo con un bracciale per adulti senza astuccio con cerniera in box da 10 pezzi	<b>M-000.09.561</b>

## HEINE GAMMA® GP

### Lo sfigmomanometro HEINE Standard con valvola a pulsante



Design e caratteristiche tecniche come il GAMMA G5 ma con valvola a pulsante.

- ∴ **Innovativa valvola a pulsante.** Facile regolazione, gonfiaggio ultrarapido. Cucchiaio regolabile per utilizzatori mancini e destrorsi.
- ∴ **Garanzia 5 anni.\***

\* per difetti inerenti design, materiali e lavorazione per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto.

GAMMA GP	
completo con un bracciale per adulti, in astuccio con cerniera	<b>M-000.09.242</b>
completo con un bracciale per bambini, in astuccio con cerniera	<b>M-000.09.243</b>
Kit Family, con bracciale bambini, adulti ed adulti piccoli in astuccio con cerniera	<b>M-000.09.556</b>
completo con un bracciale per adulti senza astuccio con cerniera in box da 10 pezzi	<b>M-000.09.562</b>

## HEINE GAMMA® XXL LF

## Il versatile modello professionale

Poiché GAMMA XXL LF è privo di mercurio, è sicuro ed ecologico.



[01]

- ∴ **Latex-free.**
- ∴ **Struttura resistente in policarbonato.** Ideale in ospedali e studi medici.
- ∴ **Grande quadrante diametro 130 mm.** Facili letture da ogni angolo di osservazione.
- ∴ **Lungo cavo** a spirale di 3 m, per un ampio raggio di lavoro.
- ∴ **Lancetta di alta qualità** calibrata e precisa, di lunga durata.
- ∴ **Valvola rilascio aria di precisione.**
- ∴ **Manometro preciso e durevole:** Non richiede alcuna manutenzione.
- ∴ **Privo di mercurio.** Ecologico.
- ∴ **Opzioni montaggio:** Parete, tavolo, rail e stativo a rotelle (altezza regolabile).
- ∴ **Garanzia 10 anni.\***

\* per difetti inerenti design, materiali e lavorazione per un periodo di 10 anni dalla data di acquisto.

## GAMMA XXL LF

Modello da parete GAMMA XXL LF-W completo con un bracciale per adulti [01]	M-000.09.323
Modello su stativo GAMMA XXL LF-S completo con un bracciale per adulti [02]	M-000.09.326
Modello da rail GAMMA XXL LF-R completo con un bracciale per adulti [03]	M-000.09.325
Modello da tavolo GAMMA XXL LF-T (tubo non spiralato) completo con un bracciale per adulti [04]	M-000.09.322
GAMMA XXL LF-WB per Wallboard, vedi pag. 130 [05]	M-000.09.327



[02]



[03]



[04]



[05]

## Accessori per GAMMA XXL LF

Porta bracciale per GAMMA XXL LF-T	M-000.09.141
Supporto da tavolo per GAMMA XXL LF-T	M-000.09.142
Stativo a rotelle regolabile per GAMMA XXL LF-S (80 – 125 cm di altezza)	M-000.09.145
Supporto universale per GAMMA XXL LF-R, -S, -W	M-000.09.306
Morsetto per rail per GAMMA XXL LF- R	M-000.09.307


Bracciali calibrati ed accessori per sfigmomanometri


Bracciali Latex-free per sfigmomanometri



Bracciali per sfigmomanometri GAMMA G7/G5/GP/XXL LF.


- ⋄ Latex-free.
- ⋄ Adatti per tutti gli sfigmomanometri più comuni.
- ⋄ Bracciali di alta qualità con chiusura a velcro in materiale resistente all'usura e fisiologicamente sicuro.
- ⋄ Doppia cucitura per garantire maggior durata.
- ⋄ Completamente lavabili.
- ⋄ Dotati di indicatore per un corretto e preciso posizionamento.
- ⋄ Misure di utilizzo, circonferenze arto e indicatore di posizionamento, riportati sui bracciali.
- ⋄ Tubo molto flessibile, con pareti spesse, per una lunga durata.
- ⋄ Affidabilità testata. Sistema totalmente ermetico.

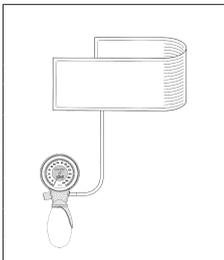	GAMMA G7/G5/GP	Bracciali a 1 tubo, completo Misure/cm Circonfer./cm			Camere d'aria a 1 tubo Misure/cm		Tessuto per bracciali Misure/cm	
	Bambino piccolo [01]	6x28	8-13	M-000.09.700	5x9	M-000.09.661	6x28	M-000.09.059
Bambino [02]	10x34	13-20	M-000.09.702	7x14	M-000.09.663	10x34	M-000.09.060	
Adulto piccolo [03]	14x53	20-29	M-000.09.704	11x23	M-000.09.664	14x53	M-000.09.061	
Adulto [04]	14x58	29-41	M-000.09.619	12x28	M-000.09.665	14x58	M-000.09.055	
Adulto grande [05]	17x70	35-47	M-000.09.706	15x34	M-000.09.668	17x70	M-000.09.058	
Coscia [06]	20x86	41-59	M-000.09.615	18x41	M-000.09.667	20x86	M-000.09.057	

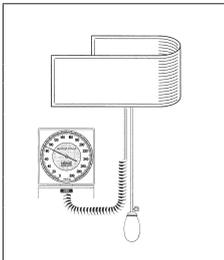	GAMMA XXL LF	Bracciali a 2 tubi, completo Misure/cm Circonfer./cm			Camere d'aria a 2 tubi Misure/cm		Tessuto per bracciali Misure/cm	
	Bambino piccolo [01]	6x28	8-13	M-000.09.701	5x9	M-000.09.671	6x28	M-000.09.059
Bambino [02]	10x34	13-20	M-000.09.703	7x14	M-000.09.673	10x34	M-000.09.060	
Adulto piccolo [03]	14x53	20-29	M-000.09.705	11x23	M-000.09.674	14x53	M-000.09.061	
Adulto [04]	14x58	29-41	M-000.09.629	12x28	M-000.09.675	14x58	M-000.09.055	
Adulto grande [05]	17x70	35-47	M-000.09.631	15x34	M-000.09.678	17x70	M-000.09.058	
Coscia [06]	20x86	41-59	M-000.09.625	18x41	M-000.09.677	20x86	M-000.09.057	

Tenere presente che è cambiata la posizione degli attacchi nei bracciali e/o camere d'aria.

Per ordinare pezzi di ricambio fornire sempre in numero di LOTTO stampato sul bracciale, cosicché possiamo fornirvi camere d'aria/ tessuto per bracciali adatti.

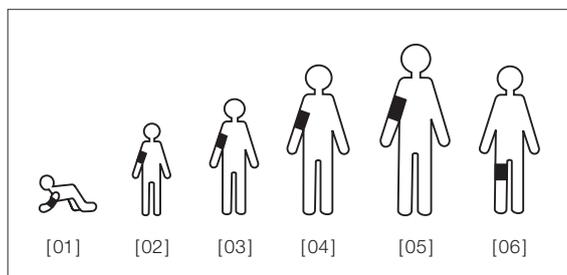

## STETOSCOPI HEINE GAMMA®

- **La robusta testina** e l'elevata superficie di appoggio escludono i rumori provocati dalle dita e producono un'eccezionale risonanza. Con cromatura opaca, igienico.
- **Testina con anello di protezione contro la sensazione di freddo per il paziente.**
- **Archetto ergonomico cromato.** Regolabile singolarmente.
- **Tube a "Y" di altissima qualità** per un'acustica ed una trasmissione del suono ottimali. Lunghezza: 56 cm.
- **Materiali privi di lattice.**

## HEINE GAMMA® 3.1 Pulse Stethoscope

Per una buona riproduzione del suono.



- **Stetoscopio con robusta testina piatta.** La testina viene inserita sotto il bracciale dello sfigmomanometro in modo comodo e semplice.
- **Membrana di qualità,** con diametro di 44 mm.
- **Sistema ad un tubo** con straordinaria trasmissione del suono.
- **Comprensivo di olive** (grandi/morbide) insonorizzate.
- **Optional:** Olive, piccole/rigide (M-000.09.946).

GAMMA 3.1

M-000.09.941

## HEINE GAMMA® 3.2 Acoustic Stethoscope

Per un'eccellente acustica.



- Stesse caratteristiche del tipo GAMMA 3.1, ma con doppia testina.
- **Testina doppia combinata** con due diversi campi di frequenza, una membrana di qualità su un lato ed una campana con camera acustica conica sull'altro. Funzione commutabile da membrana a campana.
  - **Membrana di qualità,** con diametro di 44 mm, per un'acustica eccellente con trasmissione del suono ottimale.
  - **Dimensioni della campana: diametro di 30 mm.**

GAMMA 3.2

M-000.09.942

## HEINE GAMMA® 3.3 Acoustic Stethoscope

Per l'utilizzo in ambito pediatrico.



- Stesse caratteristiche del GAMMA 3.2.
- **Grazie alla ridotta superficie di appoggio** del diametro di 31 mm GAMMA 3.3 è l'ideale per l'auscultazione pediatrica.

GAMMA 3.3

M-000.09.943

## HEINE GAMMA® C3 Cardio Stethoscope

Ideale per l'utilizzo in ambito cardiologico.



- **Eccellenti performance acustiche** specialmente nei campi di frequenza importanti per l'auscultazione dei battiti cardiaci.
- **Testina doppia combinata** con due diversi campi di frequenza, una membrana doppia combinata su un lato e una campana conica sull'altro. Funzione commutabile da membrana a campana.
- **Membrana doppia con elevata performance combinata,** del diametro di 45 mm. Garantisce un'acustica di eccellente qualità e si adatta in maniera perfetta alla pelle per una trasmissione del suono ultrasensibile.
- **Sistema due tubi in uno** per le più elevate esigenze. Altamente flessibile e anti deformazione, con straordinaria trasmissione del suono.
- **Olive incluse** (grandi/morbide) e un paio di olive di ricambio (piccole/rigide) per l'insonorizzazione.

GAMMA C3

M-000.09.944