


**Ihr PULS
wird sich gleich
erhöhen.
Vor FREUDE.**



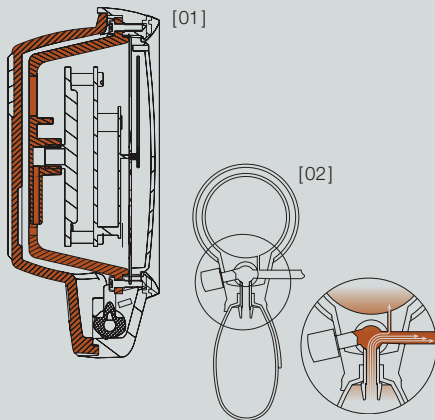

SHOCKPROOF!

**SHOCKPROOF****[01] Shockproof Doppelwand-Gehäusekonstruktion mit Messwerkfixierung.**

Die robuste Doppelwand-Gehäusekonstruktion mit Dreipunktfixierung des Messwerks sorgt für optimalen Schutz gegen Erschütterungen. Die europäische Norm EN ISO 81060-1 sowie die ANSI/AAMI/ISO 81060-1 werden erfüllt.

NEUARTIGES DRUCKMESSSYSTEM**[02] Ein-Schlauchsystem mit neuartigem Druckmesssystem.**

Die Luftventilkonstruktion mit optimierten Luftströmungswiderständen zum Messwerk dämpft die Luftstöße während des Aufpumpens. Ein gleichmäßiger, stoßfreier Lufteinlass in das Messwerk ist garantiert – ein Vorteil, den Sie bisher nur mit Doppelschlauch-Systemen hatten.

**ANERKANNTE KLINISCHE VALIDIERUNG**

HEINE GAMMA® G7

Topmodell mit Drehventil und Leichtmetallkomponenten



- ✦ **Shockproof.**
- ✦ **Latexfreie Materialien.**
- ✦ **Einzigartiges Druckmesssystem.**
- ✦ **Überdrucksicheres Manometer.** Korrosionsfrei.
- ✦ **Mikro-Filter.** Schützt Ventil und Messwerk.
- ✦ **Großes HEINE Skalendesign.** Bequem ablesbar (Ø 56 mm).
- ✦ **Höchste Zeigerqualität.** Exakt ausbalanciert, stabil justiert und stoßresistent.
- ✦ **Großer Ball.** Ermöglicht schnelles Aufpumpen der Manschette (50 % mehr Ballvolumen als herkömmliche Blutdruckmesser).
- ✦ **Einzigartiges Drehventil.** Fein dosierbar, schneller Luftablass, praktisch verschleißfrei; Gummianschlag gegen unerwünschtes Festklemmen.
- ✦ **Gehäuseoberteil aus Aluminiumlegierung** mit stoßabsorbierendem Schutzring für Ziffernblatt und Glas.
- ✦ **Gehäuseunterteil aus schlagfestem Kunststoff** mit stoßabsorbierendem Anti-Rutschbelag.
- ✦ **Löffel aus hochwertiger Zinklegierung.** Positionierbar für Links- und Rechtshänder.
- ✦ **Hochwertige 1-Schlauchmanschette mit Klettverschluss.** Waschbar.
- ✦ **Ausgereifte Ergonomie.** Liegt sehr gut in der Hand. Ist optimal ausbalanciert.
- ✦ **10 Jahre Garantie***

* auf die Fehlerfreiheit des Materials, der Verarbeitung und der Konstruktion.

GAMMA G7

komplett mit Erwachsenenmanschette, im Reißverschlussetui	M-000.09.232
komplett mit Kindermanschette, im Reißverschlussetui	M-000.09.233
Ärzte-Kit mit Kinder-, Erwachsenen- und kleiner Erwachsenenmanschette im Reißverschlussetui	M-000.09.554
komplett mit Erwachsenenmanschette ohne Reißverschlussetui im 10er Pack	M-000.09.560

HEINE GAMMA® G5

Standardmodell mit Drehventil



Ausstattung und Design wie GAMMA G7, jedoch:

- ⌚ **Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff** mit stoßabsorbierendem Anti-Rutschbelag.
- ⌚ **Löffel aus Kunststoff.** Positionierbar für Links- und Rechtshänder.
- ⌚ **5 Jahre Garantie.***

* auf die Fehlerfreiheit des Materials, der Verarbeitung und der Konstruktion.

GAMMA G5	
komplett mit Erwachsenenmanschette, im Reißverschlusssetui	M-000.09.230
komplett mit Kindermanschette, im Reißverschlusssetui	M-000.09.231
Ärzte-Kit mit Kinder-, Erwachsenen- und kleiner Erwachsenenmanschette im Reißverschlusssetui	M-000.09.555
komplett mit Erwachsenenmanschette ohne Reißverschlusssetui im 10er Pack	M-000.09.561

HEINE GAMMA® GP

Standardmodell mit Druckknopfventil



Ausstattung und Design wie GAMMA G5, jedoch mit Druckknopfventil.

- ⌚ **Innovatives Druckknopfventil.** Fein dosierbar, ultraschneller Luftablass, praktisch verschleißfrei. Von Links- und Rechtshändern gleichermaßen bequem zu bedienen.
- ⌚ **5 Jahre Garantie.***

* auf die Fehlerfreiheit des Materials, der Verarbeitung und der Konstruktion.

GAMMA GP	
komplett mit Erwachsenenmanschette, im Reißverschlusssetui	M-000.09.242
komplett mit Kindermanschette, im Reißverschlusssetui	M-000.09.243
Ärzte-Kit mit Kinder-, Erwachsenen- und kleiner Erwachsenenmanschette im Reißverschlusssetui	M-000.09.556
komplett mit Erwachsenenmanschette ohne Reißverschlusssetui im 10er Pack	M-000.09.562

HEINE GAMMA® XXL LF

Das Beste in Leistung und Qualität

Das GAMMA XXL LF – der ideale Ersatz für umweltbelastende Quecksilbergeräte.



[01]

- ✶ **Latexfreie Materialien.**
- ✶ **Besonders stabile Ausführung.** Ideal für den Krankenhauseinsatz und Praxisalltag.
- ✶ **Große, schwenkbare Skala (Ø 130 mm).** Aus großer Entfernung sehr gut ablesbar.
- ✶ **Große Reichweite.** Durch langen Spiralschlauch (3 m).
- ✶ **Ausbalancierter Zeiger.** Für genaue Anzeigen, stabil justiert.
- ✶ **Präzisionsventil aus Metall.** Leicht zu dosieren.
- ✶ **Manometer.** Wartungsfrei, präzise und langlebig.
- ✶ **Ohne Quecksilber.** Umweltfreundlich.
- ✶ **Wand-, Tisch-, Schienen- und Rollstativ-Montage.** Höhenverstellbar.
- ✶ **10 Jahre Garantie***


* auf die Fehlerfreiheit des Materials, der Verarbeitung und der Konstruktion.

GAMMA XXL LF

GAMMA XXL LF-W Wandmodell komplett mit Erwachsenenmanschette [01]	M-000.09.323
GAMMA XXL LF-S Stativmodell komplett mit Erwachsenenmanschette [02]	M-000.09.326
GAMMA XXL LF-R Schienenmodell komplett mit Erwachsenenmanschette [03]	M-000.09.325
GAMMA XXL LF-T Tischmodell komplett mit Erwachsenenmanschette (mit geradem Schlauch) [04]	M-000.09.322
GAMMA XXL LF-WB für Wallboard, siehe Seite 130 [05]	M-000.09.327

Zubehör

Zusätzliche Manschettenablage für GAMMA XXL LF-T	M-000.09.141
Tischständer für GAMMA XXL LF-T	M-000.09.142
Höhenverstellbares Stativ für GAMMA XXL LF-S (80 – 125 cm Höhe)	M-000.09.145
Universalhalter für GAMMA XXL LF-R, -S, -W	M-000.09.306
Schienenklemme für GAMMA XXL LF-R	M-000.09.307

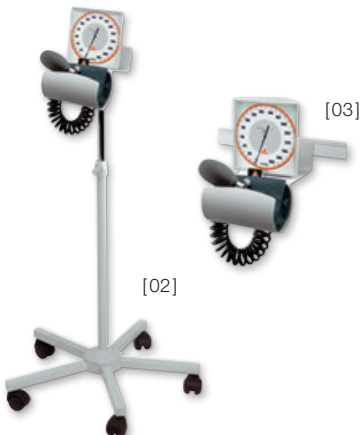

[02]

[03]



[04]



[05]


Blutdruckmanschetten


Latexfreie Blutdruckmanschetten




Manschetten für GAMMA G7/G5/GP/XXL LF Blutdruckmessgeräte.

- ✶ Latexfrei.
- ✶ Passend für die gängigsten Blutdruckmessgeräte.
- ✶ Hochwertige Manschetten mit Klettverschluss aus verschleißarmen Materialien. Physiologisch unbedenklich.
- ✶ Doppelt genäht.
- ✶ Abwaschbar.
- ✶ Mit Markierung für exakte Position.
- ✶ Aufgedruckter Größenbereich und Kontrollmarkierung für Armumfang.
- ✶ Hochflexibler Schlauch mit hoher Wandstärke. Lange Lebensdauer.
- ✶ Geprüfte Zuverlässigkeit. Absolut dichtes System.

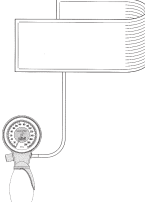	GAMMA G7/G5/GP	1-Schlauchmanschetten, kompl.		
		Größe	Umfang/cm	
	Säuglinge [01]	6x28	8–13	M-000.09.700
	Kinder [02]	10x34	13–20	M-000.09.702
	Erwachsene, klein [03]	14x53	20–29	M-000.09.704
	Erwachsene [04]	14x58	29–41	M-000.09.619
	Erwachsene, groß [05]	17x70	35–47	M-000.09.706
	Oberschenkel [06]	20x86	41–59	M-000.09.615

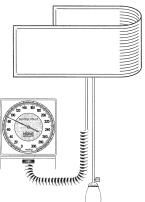	GAMMA XXL LF	2-Schlauchmanschetten, kompl.		
		Größe	Umfang/cm	
	Säuglinge [01]	6x28	8–13	M-000.09.701
	Kinder [02]	10x34	13–20	M-000.09.703
	Erwachsene, klein [03]	14x53	20–29	M-000.09.705
	Erwachsene [04]	14x58	29–41	M-000.09.629
	Erwachsene, groß [05]	17x70	35–47	M-000.09.631
	Oberschenkel [06]	20x86	41–59	M-000.09.625

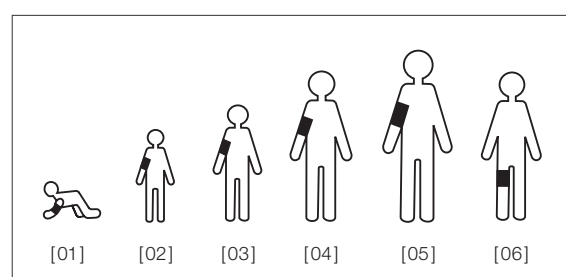

HEINE GAMMA® STETHOSKOPE

- ✶ **Massives Brustkopfstück** und ein hohes Auflagegewicht vermeiden Fingergeräusche und erzeugen so eine hervorragende Resonanz. Matt verchromt, hygienisch.
- ✶ **Bruststück mit patientenfreundlichem Kälteschutzring.**
- ✶ **Ergonomisch geformte Ohrbügel in verchromter Ausführung.** Individuell einstellbar.
- ✶ **Besonders hochwertiger Y-Schlauch** für optimale Akustik und Schallübertragung. Länge 56 cm.
- ✶ **Latexfreie Materialien.**

HEINE GAMMA® 3.1 Pulse Stethoscope

Für gute Schallwiedergabe.



- ✶ **Stethoskop mit massivem Flachbruststück.** Das Bruststück lässt sich angenehm und leicht unter die Manschette des Blutdruckmessgerätes schieben.
- ✶ **Qualitätsmembrane**, Ø 44 mm.
- ✶ **Einkanal-Schlauchsystem** mit hervorragender Schallweiterleitung.
- ✶ **Inklusive Ohroliven** (groß/ weich) zur Schallabdichtung.
- ✶ **Optional erhältlich:** Ohroliven (klein/hart) (M-000.09.946).

GAMMA 3.1

M-000.09.941

HEINE GAMMA® 3.2 Acoustic Stethoscope

Für exzellente Akustik.



Technische Details wie GAMMA 3.1 jedoch mit Doppelkopfgehäuse.

- ✶ **Kombiniertes Doppelkopfgehäuse** mit zwei verschiedenen Frequenzbereichen, einer Qualitätsmembrane auf der einen Seite und einem Trichter mit konisch zulaufender Schallkammeröffnung auf der anderen Seite. Umschaltbar von Membran- auf Trichterfunktion.
- ✶ **Qualitätsmembrane**, Ø 44 mm, für erstklassige Akustik mit optimaler Schallübertragung.
- ✶ **Trichtergröße Ø 30mm.**

GAMMA 3.2

M-000.09.942

HEINE GAMMA® 3.3 Acoustic Stethoscope

Für die Untersuchung von Kindern.



Technische Details wie GAMMA 3.2.

- ✶ **Durch die verkleinerte Membrane** von 31 mm Ø eignet sich das GAMMA 3.3 ganz besonders für die Untersuchung von Kindern.

GAMMA 3.3

M-000.09.943

HEINE GAMMA® C3 Cardio Stethoscope

Speziell für den kardiologischen Gebrauch.



- ✶ **Ausgezeichnete Akustikleistungen** besonders in den für die Auskultation der Herztöne wichtigen Frequenzbereichen.
- ✶ **Kombiniertes Doppelkopfgehäuse** mit zwei verschiedenen Frequenzbereichen, einer Dual-Doppelmembrane auf der einen Seite und einem konischen Trichter auf der anderen Seite. Umschaltbar von Membran- auf Trichterfunktion.
- ✶ **Dual-Hochleistungs-Doppelmembrane**, Ø 45 mm. Sorgt mit einer erstklassigen Akustik und einer idealen Adaption auf der Haut für eine hochsensible Schallübertragung.
- ✶ **Zweikanal-Schlauchsystem** für höchste Anforderungen. Hochelastisch und knicksicher, mit hervorragender Schallweiterleitung.
- ✶ **Inklusive Ohroliven** (groß/ weich) und einem Paar Ersatz-Ohroliven (klein/hart) zur Schallabdichtung.

GAMMA C3

M-000.09.944