


**Wir bringen
LICHT ins
Dunkle.**



Kopfstück für HEINE UniSpec® Tuben

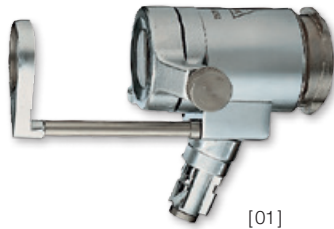

[01]



[02]



[03]

Zum Anschluss an Lichtleitkabel oder BETA 3,5V Griff mit Beleuchtungsadapter siehe Zubehör Seite 097.

- ✶ **Fiberglas-Ringbeleuchtung.** Helle, blendfreie Ausleuchtung.
- ✶ **Schwenklupe 1,5x.** Detailreiches Bild.
- ✶ **Verschlussfenster (schwenkbar) mit Gebläseanschluss.** Ermöglicht Sichtverbesserung durch Insufflation.
- ✶ **Rostfreier Stahl.**

Kopfstück für UniSpec Einmalgebrauchstuben

Kopfstück komplett mit Schwenklupe 1,5x [01]	E-003.18.100
Kopfstück ohne Verschlussfenster und Schwenklupe	E-003.18.098
Verschlussfenster, einzeln [02]	E-003.18.099
Schwenklupe 1,5x, einzeln (für Rektoskope) [03]	E-003.18.096
dito, 1,8x (nur geeignet für Proktoskope und Anoskope)	E-003.19.099

HEINE UniSpec® Einmalgebrauchs-Tuben



85x20mm 130x20mm 250x20mm

- ✶ **Einmalgebrauch.** Keine Infektionsübertragung.
- ✶ **Keine Reinigung notwendig.** Zeitgewinn.
- ✶ **Physiologisch einwandfreier, körperfreundlicher Kunststoff.** Kein Kältegefühl beim Patienten.
- ✶ **Lichttransmission durch Tubuswand.** Distaler, ringförmiger Lichtaustritt. Helle, homogene Ausleuchtung des Beobachtungsfeldes.
- ✶ **Graduierung/Markierung auf Tubus-Innenseite.** Insertionshöhe ist erkennbar.

UniSpec Einmalgebrauchs-Anoskope (85 x 20 mm)

Karton mit 25 Einmalgebrauchs-Anoskopen	E-003.19.925
Box mit 100 (4 Kartons à 25 Stück) Anoskopen	E-003.19.911

UniSpec Einmalgebrauchs-Proktoskope (130 x 20 mm)

Karton mit 25 Einmalgebrauchs-Proktoskopen	E-003.19.825
Box mit 100 (4 Kartons à 25 Stück) Proktoskopen	E-003.19.811

UniSpec Einmalgebrauchs-Rektoskope (250 x 20 mm)

Karton mit 25 Einmalgebrauchs-Rektoskopen	E-003.18.825
Box mit 100 (4 Kartons à 25 Stück) Rektoskopen	E-003.18.811

⊗: Nur für Einmalgebrauch.

Hygienefilter



∴ **Einmalgebrauchs-Hygienefilter** minimiert eine Kontamination des Doppelgebläses.

Einmalgebrauchs-Hygienefilter 25 Stück/Karton

E-000.18.116

HEINE Beleuchtungsadapter



Aufgesetzt auf eine beliebige 3,5V HEINE Stromquelle dient der Beleuchtungsadapter als Lichtquelle für HEINE F.O. Instrumente wie Anoskop, Proktoskop und Rektoskop.

Beleuchtungsadapter

3,5V XHL

Beleuchtungsadapter

X-002.98.002

XHL Xenon Halogen Ersatzlampe

X-002.88.078



