


**Se le  
acelerará el  
PULSO  
al momento.  
DE  
ALEGRÍA.**





## SHOCKPROOF!

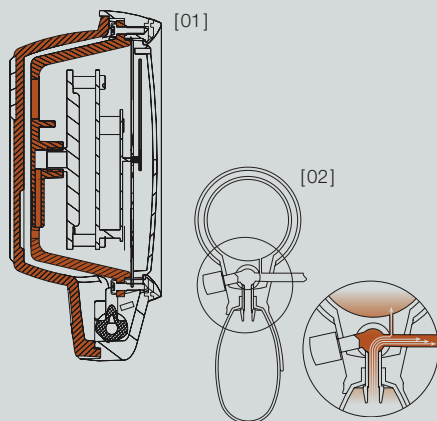

## SHOCKPROOF

**[01] Construcción de carcasa de doble pared con fijación del sistema de medida.** La construcción robusta de la carcasa con la fijación en tres puntos del sistema de medida ofrece una óptima protección contra sacudidas. Se cumple la norma europea EN ISO 81060-1 y ANSI/AAMI/ISO 81060-1.

## SISTEMA DE MEDIDOR DE PRESIÓN

**[02] Sistema de un solo tubo con un nuevo medidor de presión.**

La construcción de la válvula de ventilación con resistencia aerodinámica optimizada del instrumento amortigua los golpes de aire durante el inflado, creando un flujo de aire continuo y progresivo en la entrada del dispositivo de medición – una ventaja que hasta la fecha sólo ofrecían los sistemas con doble tubo.



VALIDACIÓN CLÍNICA RECONOCIDA

## HEINE GAMMA® G7

## El modelo superior con componentes de metal ligero



- ✦ A prueba de golpes.
- ✦ Materiales libres de látex.
- ✦ El nuevo tipo de sistema de medida.
- ✦ Manómetro con seguridad de sobrepresión.
- ✦ El micro filtro protege la válvula y el sistema de medida.
- ✦ Escala de diseño grande de HEINE. Diámetro 56mm, se puede leer cómodamente.
- ✦ Alta calidad de la aguja indicadora. Exactamente calibrada, durable y resistente a los golpes.
- ✦ Gran pera insufladora para inflar el brazalete rápidamente (50 % más volumen de la pera).
- ✦ Válvula giratoria de precisión para dosificación fina; tope de goma en ambas direcciones de giro para evitar trabadas de la válvula.
- ✦ Parte superior de la carcasa de aleación de aluminio con anillo de protección para la absorción de golpes para la esfera y el cristal.
- ✦ Parte inferior de la carcasa de plástico resistente con cubierta antideslizante para absorción de golpes.
- ✦ Cuchara de aleación de zinc de alta calidad adaptable para diestros y zurdos.
- ✦ Brazalete de 1 tubo de alta calidad con cierre de velcro lavable.
- ✦ Diseño ergonómico: El GAMMA G7 está bien equilibrado tanto para la comodidad como para su fácil manejo.
- ✦ 10 años de garantía.\*

\* para integridad del material, elaboración y fabricación.

## GAMMA G7

completo con brazalete para adultos en estuche de cremallera	M-000.09.232
completo con brazalete para niños en estuche de cremallera	M-000.09.233
El set para médico, con brazalete para niños, para adultos y adulto pequeños en estuche de cremallera	M-000.09.554
completo con brazalete para adultos, sin estuche de cremallera en caja de 10 unidades	M-000.09.560

## HEINE GAMMA® G5

### El modelo con válvula giratoria



Set y diseño igual al GAMMA G7, pero:

- ⌚ **Carcasa de plástico resistente** con cubierta antideslizante para absorción de golpes.
- ⌚ **Cuchara de plástico para diestros y zurdos.**
- ⌚ **5 años de garantía.\***

\* para integridad del material, elaboración y fabricación.

#### GAMMA G5

completo con brazalete para adultos, en estuche de cremallera	<b>M-000.09.230</b>
completo con brazalete para niños, en estuche de cremallera	<b>M-000.09.231</b>
El set para médico, con brazalete para niños, para adultos y adultos pequeños en estuche de cremallera	<b>M-000.09.555</b>
completo con brazalete para adultos, sin estuche de cremallera en caja de 10 unidades	<b>M-000.09.561</b>

## HEINE GAMMA® GP

### El modelo estándar con válvula de botón



Set y diseño igual al GAMMA G5 pero con válvula de botón.

- ⌚ **Válvula de botón innovador:** Con dosificación fina, desinflado muy rápido, prácticamente sin desgaste. Para diestros y zurdos.
- ⌚ **5 años de garantía.\***

\* para integridad del material, elaboración y fabricación.

#### GAMMA GP

completo con brazalete para adultos en estuche de cremallera	<b>M-000.09.242</b>
completo con brazalete para niños en estuche de cremallera	<b>M-000.09.243</b>
El set para médico, con brazalete para niños y para adultos y adultos pequeños en estuche de cremallera	<b>M-000.09.556</b>
completo con brazalete para adultos, sin estuche de cremallera en caja de 10 unidades	<b>M-000.09.562</b>

## HEINE GAMMA® XXL LF

## El modelo práctico para consultorio



[01]

El GAMMA XXL LF – el sustituto ideal del aparato de mercurio que evita los daños al medio ambiente.

- ✦ **Materiales sin látex.**
- ✦ **Modelo con una estabilidad especial**, ideal para aplicaciones en hospitales y en consultorios.
- ✦ **Escala giratoria, grande (diám. 130 mm)**, bien legible a gran distancia.
- ✦ **Gran alcance** mediante tubo espiralado (3 m).
- ✦ **Aguja equilibrada** para indicaciones exactas, ajustada establemente.
- ✦ **Válvula de precisión** de metal, desinflado fácil de dosificar.
- ✦ Manómetro de larga duración **preciso y libre de mantenimiento.**
- ✦ **Montaje en pared, mesa, riel y trípode con ruedas** (ajustable en altura).
- ✦ **10 años de garantía.\***


\* para integridad del material, elaboración y fabricación.

## GAMMA XXL LF

GAMMA XXL LF-modelo mural W completo con brazalete para adultos [01]	M-000.09.323
GAMMA XXL LF-modelo S con trípode completo con brazalete para adultos [02]	M-000.09.326
GAMMA XXL LF-modelo R de riel completo con brazalete para adultos [03]	M-000.09.325
GAMMA XXL LF-T modelo T de sobremesa (sin tubo espiralado) completo con brazalete para adultos [04]	M-000.09.322
GAMMA XXL LF-WB para wallboard, ver la página 130 [05]	M-000.09.327

## Accesorios

Cesta para brazal para GAMMA XXL LF-T	M-000.09.141
Soporte de sobremesa para GAMMA XXL LF-T	M-000.09.142
Tripode ajustable en altura para GAMMA XXL LF-S (80 – 125 cm de altura)	M-000.09.145
Soporte universal para GAMMA XXL LF-R, -S, -W	M-000.09.306
Pinza de fijación a riel para GAMMA XXL LF-R	M-000.09.307

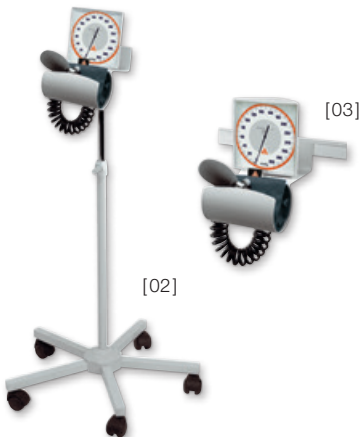

[02]

[03]



[04]



[05]

## Brazaletes para tensiómetros

### Brazaletes para tensiómetros de material sin látex




Brazaletes para tensiómetros GAMMA G7/G5/GP/XXL LF.

- ✧ Materiales sin látex.
- ✧ Adaptables a los tensiómetros usuales.
- ✧ Brazaletes de alta calidad con cierre de velcro de material resistente, fisiológicamente inofensivo.
- ✧ Costura doble.
- ✧ Lavable.
- ✧ Con señalizador de posición exacta.
- ✧ Límites de tamaño impresos con marca de control para circunferencia del brazo.
- ✧ Tubo de gran flexibilidad con amplio espesor de pared. Alta duración.
- ✧ Fiabilidad comprobada, sistema totalmente hermético.

	GAMMA G7/G5/GP	Brazaletes de 1 tubo, completo		
		Tamaño	Perímetro /cm	
	Bebés [01]	6x28	8–13	M-000.09.700
	Niños [02]	10x34	13–20	M-000.09.702
	Adultos, pequeños [03]	14x53	20–29	M-000.09.704
	Adultos [04]	14x58	29–41	M-000.09.619
	Adultos, grande [05]	17x70	35–47	M-000.09.706
	Muslo [06]	20x86	41–59	M-000.09.615

	GAMMA XXL LF	Brazaletes de 2 tubos, compl,		
		Tamaño	Perímetro /cm	
	Bebés [01]	6x28	8–13	M-000.09.701
	Niños [02]	10x34	13–20	M-000.09.703
	Adultos, pequeños [03]	14x53	20–29	M-000.09.705
	Adultos [04]	14x58	29–41	M-000.09.629
	Adultos, grande [05]	17x70	35–47	M-000.09.631
	Muslo [06]	20x86	41–59	M-000.09.625

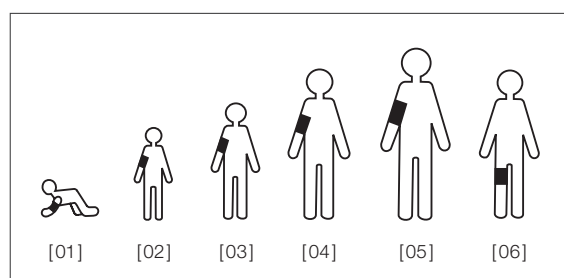

**ESTETOSCOPIO HEINE GAMMA®**

- Su **campana de gran tamaño** y un elevado peso de la membrana evitan los ruidos y generan una excelente resonancia. Cromado mate, higiénico.
- **Campana con protección contra el frío para el confort del paciente.**
- **Soporte ergonómico en acabado cromado.** Se ajusta individualmente.
- Destacan su acústica y la transmisión de sonido gracias a la gran calidad de su **tubo en forma de Y**, de 56cm de longitud.
- **Materiales** sin látex.

**HEINE GAMMA® 3.1 Pulse Stethoscope****Para una fina reproducción del sonido.**

- **Estetoscopio con una gran campana** que se desplaza ligera y cómodamente bajo el brazalete del esfigmomanómetro.
- **Membrana de calidad**, Ø 44mm.
- **Sistema de tubo de un canal** con una buena transmisión del sonido.
- **Incluye olivas** (grandes/blandas) para aislar el sonido.
- **Opcionalmente disponible:** Olivas, pequeñas/duras (M-000.09.946).

GAMMA 3.1

M-000.09.941

**HEINE GAMMA® 3.2 Acoustic Stethoscope****Con una excelente acústica.**

Datos técnicos como en GAMMA 3.1 pero con campana doble.

- **Campana doble** con dos frecuencias diferentes, una membrana de calidad en un extremo y un captador con apertura cónica en el otro extremo. Función membrana y función cono a elección.
- **Membrana de calidad**, Ø 44mm, con una acústica y una transmisión de sonido de gran calidad.
- **Tamaño del cono:** Ø 30mm.

GAMMA 3.2

M-000.09.942

**HEINE GAMMA® 3.3 Acoustic Stethoscope****Para realizar exploraciones en los niños.**

Datos técnicos como en GAMMA 3.2.

- **Gracias a una membrana de menor tamaño**, 31 mm Ø, el estetoscopio GAMMA 3.3 es perfecto para realizar exploraciones en los más pequeños.

GAMMA 3.3

M-000.09.943

**HEINE GAMMA® C3 Cardio Stethoscope****Especialmente diseñado para realizar exploraciones cardiacas.**

- **Excelente eficacia acústica** especialmente en las frecuencias importantes para auscultar el corazón.
- **Campana doble** con dos frecuencias distintas, una membrana doble dual en un extremo y un cono en el otro extremo. Función membrana y función cono a elección.
- **Membrana doble dual**, Ø 45 mm. Gracias a una excelente acústica y una buena adaptación sobre la piel, es ideal para una transmisión de sonido de alta sensibilidad.
- **Tubo de doble canal** para poder cumplir con los requisitos más exigentes. Muy elástico y resistente a dobleces, perfecto para una excelente transferencia de sonido.
- **Incluye olivas** (grandes/blandas) y dos olivas de repuesto (pequeñas/duras) para aislar el sonido.

GAMMA C3

M-000.09.944