

HEINE ORL strumenti diagnostici per veterinaria



	Testina aperta G100	Otoscopio BETA 200 VET F.O.
Struttura Testina	Metallo	Metallo
Ingrandimento	1,6x	2,5x
Illuminazione	F.O. XHL o LED ^{HQ}	F.O. XHL o LED ^{HQ}
Dimensioni strumento	Professionale	Professionale
Manici compatibili / Fonti di energia	• Manico a batterie (solo XHL) • Manico ricaricabile USB • Manico ricaricabile con caricatore da tavolo • EN 200 / EN 200-1	• Manico a batterie (solo XHL) • Manico ricaricabile USB • Manico ricaricabile con caricatore da tavolo • EN 200 / EN 200-1
Speculum	• Speculum di metallo, chiusi, lunghi • Speculum di metallo, scanalati per testina • Speculum divaricabile • Speculum chiusi, corti • Speculum monouso UniSpec VET con adattore	• Speculum riutilizzabili VET
Test pneumatico della membrana timpanica	—	Attacco per insufflazione disponibile
Pagina del catalogo	025	027

Testina aperta HEINE G100 LED

Con illuminazione LED di qualità HEINE – LED^{HQ}

LED^{HQ}
LED IN HEINE QUALITY.



Solida testina in metallo e lente orientabile, antigraffio per una durata straordinariamente lunga e risultati di indagine di qualità costante. LED dalla durata praticamente illimitata, non necessita della sostituzione della lampadina.

- ✦ **Testina aperta.** Strumentazione ottimale con ingrandimento e illuminazione. Operazioni semplificate durante l'esame.
- ✦ **Lente orientabile trattata, resistente ai graffi, con ingrandimento 1,6x** per un'immagine più dettagliata.
- ✦ **Illuminazione a fibra ottica.** Permette un'illuminazione uniforme e chiara e una visione senza riflessi del timpano e del condotto uditivo.
- ✦ **Ci sono i LED e ci sono i LED^{HQ}.** HEINE ha imposto un nuovo standard, nel quale solo il meglio è accettabile – dalla scelta del materiale alla lavorazione, dall'intensità luminosa alla dimmerabilità, dalla gestione termica al più alto indice di resa cromatica possibile. **Tutto questo è ciò che chiamiamo LED di qualità HEINE. In breve: LED^{HQ}.**
- ✦ **L'illuminazione a LED è perfettamente adatta al sistema ottico** e fornisce allo stesso tempo un'illuminazione molto brillante ed uniforme per ottenere una diagnosi accurata.
- ✦ **Sistema brevettato di regolazione unico nel suo genere, comodamente dimmerabile** fra il 3 e il 100 % con un solo dito.
- ✦ **Facile da pulire.** Grazie ai bordi arrotondati può essere disinfettata in modo ottimale anche con disinfettanti disponibili in commercio.
- ✦ **Doppio attacco a baionetta per gli speculum.** Stabilità degli speculum.
- ✦ **La massima efficienza della testina aperta G100 LED può essere ottenuta solo con i manici ricaricabili BETA ed il trasformatore da parete EN 200 / EN 200-1.**
- ✦ **Disponibile anche con illuminazione alogena allo xenon XHL.** Illuminazione chiara e resa cromatica autentica, per altre specifiche tecniche guarda testina aperta G100.

Kit diagnostici HEINE G100



[01]

Senza astuccio

Testina aperta G100 con

LED

BETA4 USB manico ricaricabile con cavo USB
e alimentatore elettrico [01]

G-010.28.388

BETA4 NT manico ricaricabile con caricatore da tavolo NT4

G-010.24.420

Set diagnostici per veterinaria HEINE

Con illuminazione XHL o LED^{HQ}**Set contiene: Testina aperta G100,**

1 set di speculum chiusi – lunghi (57mm x 4mm Ø, 65mm x 6mm Ø, 90mm x 7mm Ø), lampadina di ricambio per la versione XHL, in astuccio rigido.



	2,5V XHL	3,5V XHL	LED
BETA manico a batterie	G-112.10.118		
BETA4 USB manico ricaricabile con cavo USB e alimentatore elettrico		G-112.27.388	G-112.28.388
BETA4 NT manico ricaricabile con caricatore da tavolo NT4		G-112.23.420	G-112.24.420

**Set contiene: Testina aperta G100, oftalmoscopio BETA 200,**

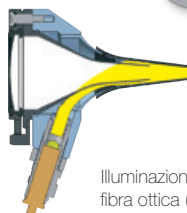
1 set di speculum chiusi – lunghi (57mm x 4mm Ø, 65mm x 6mm Ø, 90mm x 7mm Ø), una lampadina di ricambio per ogni strumento per la versione XHL, in astuccio rigido.

	2,5V XHL	3,5V XHL	LED
BETA manico a batterie	G-148.10.118		
BETA4 USB manico ricaricabile con cavo USB e alimentatore elettrico		G-148.27.388	G-148.28.388
BETA4 NT manico ricaricabile con caricatore da tavolo NT4		G-148.23.420	G-148.24.420

∴ Per il oftalmoscopio HEINE BETA 200 prego vedere pagina 037.

Otoscopio HEINE BETA® 200 LED VET a F.O.

Otoscopio per veterinaria con illuminazione LED^{HQ}

LED^{HQ}
LED IN HEINE QUALITY.

Illuminazione a
fibra ottica (F.O.)

Otoscopio con robusta custodia in metallo e lenti antiriflesso per una durata straordinariamente lunga e risultati di indagine di qualità costante. LED dalla durata praticamente illimitata, non necessita della sostituzione della lampada.

- ✚ **Ampia lente d'ingrandimento 2,5x.** Lente sviluppata appositamente per le applicazioni veterinarie, in cui la lunghezza focale è stata impostata proprio per l'impiego con specula più lunghi.
- ✚ **Illuminazione a fibra ottica.** Permette un'illuminazione uniforme e chiara e una visione senza riflessi del timpano e del condotto uditivo.
- ✚ **Ci sono i LED e ci sono i LED^{HQ}.** HEINE ha imposto un nuovo standard, nel quale solo il meglio è accettabile – dalla scelta del materiale alla lavorazione, dall'intensità luminosa alla dimmerabilità, dalla gestione termica al più alto indice di resa cromatica possibile. Tutto questo è ciò che chiamiamo **LED di qualità HEINE. In breve: LED^{HQ}.**
- ✚ **L'illuminazione a LED è perfettamente adatta al sistema ottico** e fornisce allo stesso tempo un'illuminazione molto brillante ed uniforme per ottenere una diagnosi accurata.
- ✚ **Sistema brevettato di regolazione unico nel suo genere, comodamente dimmerabile** fra il 3 e il 100% con un solo dito.
- ✚ **Finestrella di osservazione robusta,** girevole, per orientare facilmente lo strumento e per pulire la testa.
- ✚ **Accesso per insufflazione integrato.** Impedisce la fuoriuscita indesiderata di aria durante il test pneumatico della membrana timpanica.
- ✚ **Compatibile con gli speculum riutilizzabili VET.** Trovi le informazioni per ordinare gli accessori a pagina 029–031.
- ✚ **La massima efficienza del BETA 200 LED VET può essere ottenuta solo con i manici ricaricabili BETA ed il trasformatore da parete EN 200 / EN 200-1.**
- ✚ **Disponibile anche con illuminazione alogena allo xenon XHL.** Illuminazione chiara e resa cromatica autentica, per le altre specifiche tecniche vedi otoscopio BETA 200 LED VET F.O.

Kit diagnostici HEINE BETA 200 VET

Con illuminazione XHL o LED^{HQ}


[01]

Senza astuccio

Otoscopio BETA 200 VET F.O. con	2,5V XHL	3,5V XHL	LED
BETA manico a batterie	G-011.10.118		
★ BETA4 USB manico ricaricabile con cavo USB e alimentatore elettrico [01]		G-011.27.388	G-011.28.388
BETA4 NT manico ricaricabile con caricatore da tavolo NT4		G-011.23.420	G-011.24.420

Speculum di metallo, chiusi – lunghi



- ✶ In metallo cromato di alta qualità. Facili da pulire, disinfettare e sterilizzare.
- ✶ Doppio attacco a baionetta. Stabile connessione alla testina.

**Speculum di metallo
per testina aperta G100/G100 LED**

57 mm lunghezza / Ø 4 mm	G-000.21.330
65 mm lunghezza / Ø 6 mm	G-000.21.331
90 mm lunghezza / Ø 7 mm	G-000.21.332
170 mm lunghezza / Ø 10 mm	G-000.21.350

Speculum di metallo – scanalati



- ✶ Metallo cromato di alta qualità. Facile da pulire, disinfettare e sterilizzare.
- ✶ Internamente opacizzato. Riduce i riflessi.
- ✶ Apertura a 60° con bordi smussati. Ideale per strumentare, inserimento atraumatico.
- ✶ Doppio attacco a baionetta. Stabile connessione alla testina.

**Speculum di metallo – scanalati
per testina aperta G100/G100 LED**

65 mm lung. / Ø 6 mm	G-000.21.341
90 mm lung. / Ø 7 mm	G-000.21.342

Speculum divaricabile



Questo speculum versatile si è affermato soprattutto come speculum universale per l'impiego su animali piccoli.

- ✶ Apertura distale fino a 28 mm con 4 possibilità di bloccaggio. Versatile per esami e trattamenti.
- ✶ Esecuzione in metallo cromato di alta qualità. Facile da pulire, disinfettare e sterilizzare.
- ✶ Internamente opacizzato. Riduce i riflessi.
- ✶ Branche ovalizzate e bordi smussati. Atraumatico.
- ✶ Doppio attacco a baionetta. Stabile connessione alla testina.

**Speculum divaricabile
per testina aperta G100/G100 LED**

Speculum divaricabile per testina aperta (lunghezza 95 mm)	G-000.21.360
--	--------------

Speculum chiusi – corti



- ✦ **In SANALON S, superficie liscia; esecuzione robusta.** Sporco e germi sono facilmente rimovibili. Disinfettabili con le usuali soluzioni e sterilizzabili in autoclave sino a 134 °C.
- ✦ **Forma anatomica.** Inserimento atraumatico.
- ✦ **Blocco di sicurezza in metallo, a baionetta.** Ottimale connessione all'otoscopio.

Speculum chiusi corti, in SANALON S
per testina aperta G100/G100 LED e otoscopio BETA 100 VET*

1 serie di 5 di speculum per veterinaria in SANALON S	G-000.21.316
40mm lunghezza / Ø 2,2mm	G-000.21.310
40mm lunghezza / Ø 2,8mm	G-000.21.311
40mm lunghezza / Ø 3,5mm	G-000.21.312
40mm lunghezza / Ø 4,5mm	G-000.21.313
40mm lunghezza / Ø 5,5mm	G-000.21.314

Speculum riutilizzabili VET



Per l'utilizzo con BETA 100 VET* è necessario un adattatore VET [01].

- ✦ **Esecuzione in SANALON S, superficie liscia e compatta.** Igienici e di facile pulizia; disinfettabili e sterilizzabili in autoclave fino a 134 °C.
- ✦ **Forma anatomica.** Inserimento atraumatico.
- ✦ **Pratico sistema di fissaggio.** Ottimale connessione all'otoscopio.

Speculum riutilizzabili in SANALON S
per BETA 200 VET e BETA 100 VET* con adattatore

1 serie di 3 speculum riutilizzabili in SANALON S	G-000.21.213
61mm lunghezza / Ø 4mm	G-000.21.210
61mm lunghezza / Ø 6mm	G-000.21.211
61mm lunghezza / Ø 9mm	G-000.21.212

Adattatore per speculum VET [01]	G-000.21.214
----------------------------------	--------------

* strumento fuori produzione

Speculum monouso HEINE UniSpec®



Per l'uso con la testina aperta G100/G100 LED è necessario l'adattatore illustrato.

- ✶ **Non necessitano di pulizia.** Risparmio di tempo.
- ✶ **Igiene assicurata.** Nessun rischio di contaminazione.
- ✶ **Confezione da 1000 pezzi.** Economici.
- ✶ **Originali HEINE.** Ottimale connessione all'otoscopio.

Speculum monouso UniSpec

per BETA 100 VET*, otoscopio operativo* e testina aperta G100/G100 LED

Confezione da 1000 speculum monouso UniSpec da Ø 2,5mm	B-000.11.242
Confezione da 1000 speculum monouso UniSpec da Ø 4mm	B-000.11.241
Adattatore per l'uso degli UniSpec con la testina aperta [01]	G-000.21.302
Dispenser per Speculum UniSpec	B-000.11.146

⊗: Solo per monouso.

Ulteriori articoli / accessori

ORL strumenti diagnostici per veterinaria HEINE



Speculum riutilizzabili per otoscopio operativo*

1 set di 5 speculum auricolari e 1 speculum nasale	B-000.11.221
3 speculum auricolari Ø 3,5/4,5/5,5mm	B-000.11.222
Speculum auricolare Ø 2,2mm	B-000.11.215
Speculum auricolare Ø 2,8mm	B-000.11.216
Speculum auricolare Ø 3,5mm	B-000.11.217
Speculum auricolare Ø 4,5mm	B-000.11.218
Speculum auricolare Ø 5,5mm	B-000.11.219
Speculum nasale Ø 10mm	B-000.11.220



Speculum monouso AllSpec per BETA 100 VET* e otoscopio operativo*

Confezione da 1000 pezzi Ø 2,5mm [01]	B-000.11.128
Confezione da 1000 pezzi Ø 4mm [01]	B-000.11.127
Cartone da 10 confezioni da 1000 pezzi, Ø 2,5mm (bambini)	B-000.11.138
Cartone da 10 confezioni da 1000 pezzi, Ø 4mm (adulti)	B-000.11.137
Confezioni-dispenser da 250 speculum, Ø 2,5mm [02]	B-000.11.153
Confezioni-dispenser da 250 speculum, Ø 4mm [02]	B-000.11.152
Cartone da 10 confezioni-dispenser da 250 speculum (2500 pz) Ø 2,5mm	B-000.11.151
Cartone da 10 confezioni-dispenser da 250 speculum (2500 pz) Ø 4mm	B-000.11.150
Adattatore per speculum AllSpec [03]	B-000.11.306
Dispenser per speculum AllSpec (2x 50 speculum) [04]	B-000.11.149

⊗: Solo per monouso.

*strumento fuori produzione

[03]



[01]



[02]



[04]



Ulteriori articoli / accessori

ORL strumenti diagnostici per Veterinaria HEINE


Testina aperta G100

2,5V XHL

3,5V XHL

LED

con lente orientabile, senza manico

G-001.21.301

G-002.21.301

G-008.21.301


Testina Otoscopio BETA 200 VET a F.O.

2,5V XHL

3,5V XHL

LED

senza manico e senza accessori

G-001.21.250

G-002.21.250

G-008.21.250


Lampadina di ricambio per G100 e BETA 200 VET

2,5V XHL

3,5V XHL

Lampadina di ricambio XHL xenon alogena

X-001.88.077

X-002.88.078


Lampadina di ricambio per Otoscopio operativo* e BETA 100 VET*

2,5V XHL

3,5V XHL

Lampadina di ricambio XHL xenon alogena

X-001.88.037

X-002.88.049


Lente orientabile per Testina aperta G100

Lente orientabile, sola

G-000.21.209


Monopalla per il test pneumatico del timpano

Monopalla per otoscopi BETA 200 VET e BETA 100 VET*

B-000.11.240

*strumento fuori produzione

