


**Il vostro
BATTITO
cardiaco
accelererà.
Dalla
GIOIA.**





SHOCKPROOF

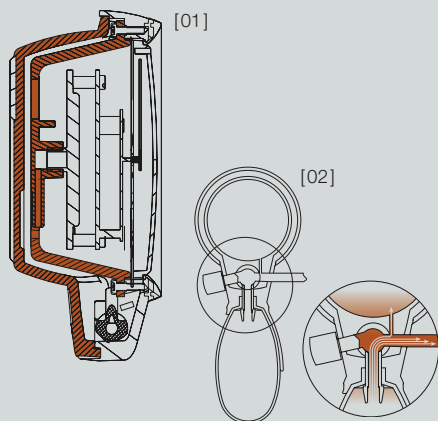

SHOCKPROOF

[01] La serie GAMMA G è stata progettata per durare a lungo.

Un complesso sistema di materiali assorbenti protegge il manometro da eventuali urti e garantisce strumenti di insuperabile durata. In conformità con la norma europea EN ISO 81060-1 e con la ANSI/AAMI/ISO 81060-1.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE-PRESSIONE DELL'ARIA

[02] Sfigmomanometri a tubo singolo con un innovativo sistema di distribuzione-pressione dell'aria.

Il design della valvola permette una pressione ideale dell'aria ed assorbe i picchi del flusso dell'aria durante il gonfiaggio, garantendo un incremento di pressione accurato e uniforme. Questi vantaggi sino ad ora erano possibili solo con i sistemi a doppio tubo.



VALIDAZIONE CLINICA E.S.H.

HEINE GAMMA® G7

Il modello top in lega di alluminio con valvola a rotazione



- ✦ **Antishock.**
- ✦ **Latex-free.**
- ✦ **Sistema di misurazione della pressione unico nel suo genere.**
- ✦ **Manometro protetto contro la sovrappressione.** Assicura durata e affidabilità.
- ✦ **Micro-filtro.** Protegge valvola e manometro.
- ✦ **Grande quadrante graduato.** Ø 56mm, cifre nere su sfondo bianco per una chiara lettura dei valori.
- ✦ **Lancetta di alta qualità.** Calibrata e precisa, di lunga durata e resistente agli urti.
- ✦ **Monopalla di grandi dimensioni.** 50 % maggiore in volume per un gonfiaggio rapido del bracciale.
- ✦ **Esclusiva valvola rilascio aria di precisione.** Consente un controllo del rilascio d'aria fine ed esatto, rapido sgonfiaggio e lunga durata. Un fermo in gomma previene il blocco della valvola.
- ✦ **Chassis superiore realizzato in lega di alluminio,** con un anello antiurto per proteggere lancetta e vetro.
- ✦ **Chassis inferiore in plastica antiurto** con l'aggiunta di un rivestimento antishock e antiscivolo.
- ✦ **Cucchiaino regolabile, in lega leggera.** Per utilizzatori mancini e destrorsi.
- ✦ **Bracciale calibrato di alta qualità, singolo tubo con chiusura a velcro.** Lavabile.
- ✦ **Design ergonomico.** G7 è perfettamente bilanciato per comfort e facilità d'uso.
- ✦ **Garanzia 10 anni.***

* per difetti inerenti design, materiali e lavorazione per un periodo di 10 anni dalla data di acquisto.

GAMMA G7

completo con un bracciale per adulti, in astuccio con cerniera	M-000.09.232
completo con un bracciale per bambini, in astuccio con cerniera	M-000.09.233
Kit family, con bracciale bambini, adulti ed adulti piccoli in astuccio con cerniera	M-000.09.554
completo con un bracciale per adulti senza astuccio con cerniera in box da 10 pezzi	M-000.09.560

HEINE GAMMA® G5

Lo sfigmomanometro HEINE Standard



Design e caratteristiche tecniche come il GAMMA G7, eccetto:

- ⌘ **Chassis da plastica antiurto** con rivestimento antishock e antiscivolo.
- ⌘ **Cucchiaino regolabile, in materiale termoplastico.** Per utilizzatori mancini e destrorsi.
- ⌘ **Garanzia 5 anni.***

* per difetti inerenti design, materiali e lavorazione per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto.

GAMMA G5	
completo con un bracciale per adulti, in astuccio con cerniera	M-000.09.230
completo con un bracciale per bambini, in astuccio con cerniera	M-000.09.231
Kit family, con bracciale bambini, adulti ed adulti piccoli in astuccio con cerniera	M-000.09.555
completo con un bracciale per adulti senza astuccio con cerniera in box da 10 pezzi	M-000.09.561

HEINE GAMMA® GP

Lo sfigmomanometro HEINE Standard con valvola a pulsante



Design e caratteristiche tecniche come il GAMMA G5 ma con valvola a pulsante.

- ⌘ **Innovativa valvola a pulsante.** Facile regolazione, gonfiaggio ultrarapido. Cucchiaino regolabile per utilizzatori mancini e destrorsi.
- ⌘ **Garanzia 5 anni.***

* per difetti inerenti design, materiali e lavorazione per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto.

GAMMA GP	
completo con un bracciale per adulti, in astuccio con cerniera	M-000.09.242
completo con un bracciale per bambini, in astuccio con cerniera	M-000.09.243
Kit family, con bracciale bambini, adulti ed adulti piccoli in astuccio con cerniera	M-000.09.556
completo con un bracciale per adulti senza astuccio con cerniera in box da 10 pezzi	M-000.09.562

HEINE GAMMA® XXL LF

Il versatile modello professionale

Poiché GAMMA XXL LF è privo di mercurio, è sicuro ed ecologico.



[01]

- ✶ **Latex-free.**
- ✶ **Struttura resistente in polycarbonato.** Ideale in ospedali e studi medici.
- ✶ **Grande quadrante diametro 130 mm.** Facili letture da ogni angolo di osservazione.
- ✶ **Lungo cavo** a spirale di 3 m, per un ampio raggio di lavoro.
- ✶ **Lancetta di alta qualità** calibrata e precisa, di lunga durata.
- ✶ **Valvola rilascio aria di precisione.**
- ✶ **Manometro preciso e durevole:** Non richiede alcuna manutenzione.
- ✶ **Privo di mercurio.** Ecologico.
- ✶ **Opzioni montaggio:** Parete, tavolo, rail e stativo a rotelle (altezza regolabile).
- ✶ **Garanzia 10 anni.***


* per difetti inerenti design, materiali e lavorazione per un periodo di 10 anni dalla data di acquisto.

GAMMA XXL LF

Modello da parete GAMMA XXL LF-W completo con un bracciale per adulti [01]	M-000.09.323
Modello su stativo GAMMA XXL LF-S completo con un bracciale per adulti [02]	M-000.09.326
Modello da rail GAMMA XXL LF-R completo con un bracciale per adulti [03]	M-000.09.325
Modello da tavolo GAMMA XXL LF-T (tubo non spiralato) completo con un bracciale per adulti [04]	M-000.09.322
GAMMA XXL LF-WB per wallboard, vedi pag. 130 [05]	M-000.09.327

Accessori per GAMMA XXL LF

Porta bracciale per GAMMA XXL LF-T	M-000.09.141
Supporto da tavolo per GAMMA XXL LF-T	M-000.09.142
Stativo a rotelle regolabile per GAMMA XXL LF-S (80 – 125 cm di altezza)	M-000.09.145
Supporto universale per GAMMA XXL LF-R, -S, -W	M-000.09.306
Morsetto per rail per GAMMA XXL LF- R	M-000.09.307

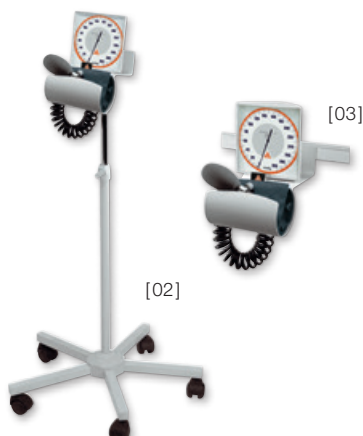

[02]



[03]



[04]



[05]


Bracciali calibrati


Bracciali latex-free per sfigmomanometri




Bracciali per sfigmomanometri GAMMA G7 / G5 / GP / XXL LF.

- ✧ Latex-free.
- ✧ Adatti per tutti gli sfigmomanometri più comuni.
- ✧ Bracciali di alta qualità con chiusura a velcro in materiale resistente all'usura e fisiologicamente sicuro.
- ✧ Doppia cucitura per garantire maggior durata.
- ✧ Completamente lavabili.
- ✧ Dotati di indicatore per un corretto e preciso posizionamento.
- ✧ Misure di utilizzo, circonferenze arto e indicatore di posizionamento, riportati sui bracciali.
- ✧ Tubo molto flessibile, con pareti spesse, per una lunga durata.
- ✧ Affidabilità testata. Sistema totalmente ermetico.

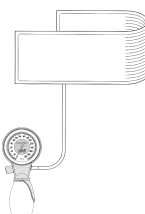	GAMMA G7 / G5 / GP		Bracciali a 1 tubo, completo		
			Misure/cm	Circonfer./cm	
	Bambino piccolo [01]		6x28	8–13	M-000.09.700
	Bambino [02]		10x34	13–20	M-000.09.702
	Adulto piccolo [03]		14x53	20–29	M-000.09.704
	Adulto [04]		14x58	29–41	M-000.09.619
	Adulto grande [05]		17x70	35–47	M-000.09.706
	Coscia [06]		20x86	41–59	M-000.09.615

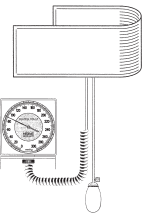	GAMMA XXL LF		Bracciali a 2 tubi, completo		
			Misure/cm	Circonfer./cm	
	Bambino piccolo [01]		6x28	8–13	M-000.09.701
	Bambino [02]		10x34	13–20	M-000.09.703
	Adulto piccolo [03]		14x53	20–29	M-000.09.705
	Adulto [04]		14x58	29–41	M-000.09.629
	Adulto grande [05]		17x70	35–47	M-000.09.631
	Coscia [06]		20x86	41–59	M-000.09.625

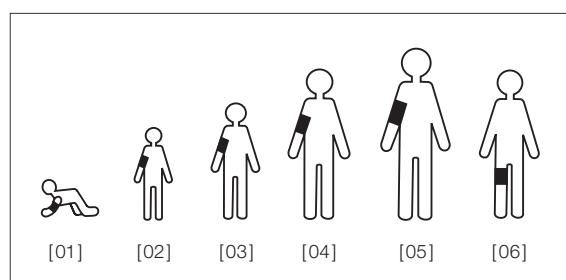

STETOSCOPI HEINE GAMMA®

- ✶ **La robusta testina** e l'elevata superficie di appoggio escludono i rumori provocati dalle dita e producono un'eccezionale risonanza. Con cromatura opaca, igienico.
- ✶ **Testina con anello di protezione contro la sensazione di freddo per il paziente.**
- ✶ **Archetto ergonomico cromato.** Regolabile singolarmente.
- ✶ **Tubo a "Y" di altissima qualità** per un'acustica ed una trasmissione del suono ottimali. Lunghezza: 56 cm.
- ✶ **Materiali privi di lattice.**

HEINE GAMMA® 3.1 Pulse Stethoscope

Per una buona riproduzione del suono.



- ✶ **Stetoscopio con robusta testina piatta.** La testina viene inserita sotto il bracciale dello sfigmomanometro in modo comodo e semplice.
- ✶ **Membrana di qualità,** con diametro di 44 mm.
- ✶ **Sistema ad un tubo** con straordinaria trasmissione del suono.
- ✶ **Comprensivo di olive** (grandi/morbide) insonorizzate.
- ✶ **Optional:** Olive, piccole/rigide (M-000.09.946).

GAMMA 3.1

M-000.09.941

HEINE GAMMA® 3.2 Acoustic Stethoscope

Per un'eccellente acustica.



- Stesse caratteristiche del tipo GAMMA 3.1, ma con doppia testina.
- ✶ **Testina doppia combinata** con due diversi campi di frequenza, una membrana di qualità su un lato ed una campana con camera acustica conica sull'altro. Funzione commutabile da membrana a campana.
 - ✶ **Membrana di qualità,** con diametro di 44 mm, per un'acustica eccellente con trasmissione del suono ottimale.
 - ✶ **Dimensioni della campana: diametro di 30 mm.**

GAMMA 3.2

M-000.09.942

HEINE GAMMA® 3.3 Acoustic Stethoscope

Per l'utilizzo in ambito pediatrico.



- Stesse caratteristiche del GAMMA 3.2.
- ✶ **Grazie alla ridotta superficie di appoggio** del diametro di 31 mm GAMMA 3.3 è l'ideale per l'auscultazione pediatrica.

GAMMA 3.3

M-000.09.943

HEINE GAMMA® C3 Cardio Stethoscope

Ideale per l'utilizzo in ambito cardiologico.



- ✶ **Eccellenti performance acustiche** specialmente nei campi di frequenza importanti per l'auscultazione dei battiti cardiaci.
- ✶ **Testina doppia combinata** con due diversi campi di frequenza, una membrana doppia combinata su un lato e una campana conica sull'altro. Funzione commutabile da membrana a campana.
- ✶ **Membrana doppia con elevata performance combinata,** del diametro di 45 mm. Garantisce un'acustica di eccellente qualità e si adatta in maniera perfetta alla pelle per una trasmissione del suono ultrasensibile.
- ✶ **Sistema due tubi in uno** per le più elevate esigenze. Altamente flessibile e anti deformazione, con straordinaria trasmissione del suono.
- ✶ **Olive incluse** (grandi/morbide) e un paio di olive di ricambio (piccole/rigide) per l'insonorizzazione.

GAMMA C3

M-000.09.944