


∴ HEINE OMEGA 500 Breath Shield


Breath Shield pour un champ de vision libre lors de l'examen avec l'Ophthalmoscope Indirect Binoculaire HEINE OMEGA 500.

∴ **Champ de vision libre** à travers l'ophtalmoscope grâce à une encoche au niveau de l'optique.

∴ **Facile à fixer.**

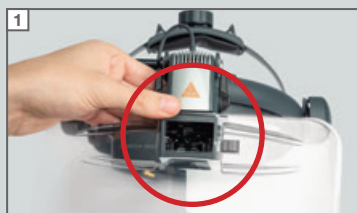

Placez le Breath Shield sur l'avant de l'instrument, sous le logo HEINE, de sorte que l'encoche du Breath Shield arrive directement au-dessus de la fenêtre optique.

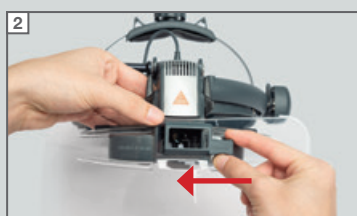

Prenez le clip de fixation fourni et faites-le glisser sur le rail de l'instrument.

∴ **Nettoyage et désinfection :**



Pour le nettoyer et le désinfecter, retirez à la fois le Breath Shield transparent et le clip de fixation de l'instrument.

Vérifiez si le Breath Shield présente des dommages ou des salissures avant de le réutiliser. En présence de dommages ou de salissures inamovibles, le Breath Shield ne doit plus être utilisé et doit être jeté. Désinfectez le produit avant de le jeter. Les règles d'élimination propres à chaque pays doivent être respectées.

Vous trouverez des instructions détaillées pour le nettoyage et la désinfection du Breath Shield sur heine.com/fr/breath-shield

∴ Matériau léger et indéformable.

∴ Dimensions largeur x longueur : 231 mm x 205,08 mm.

∴ Ne doit être utilisé qu'avec le HEINE OMEGA 500.

Possibilités de commande

Les Breath Shields peuvent être commandés auprès de votre revendeur de dispositifs médicaux. Disponible individuellement ou en lot de trois.

Références

∴ HEINE OMEGA 500 Breath Shield (1 x Breath Shield, 1 x clip de fixation) : **C-000.33.016**

∴ HEINE OMEGA 500 Breath Shield (3x Breath Shield, 1 x clip de fixation) : **C-000.33.017**